



Odontos

Dental
Trade
Company



Catalog Of Dental Products

DETAX

ROON

D+Z
DRENDL-ZWELING

mega-physik

VERICOM
Dental materials

ORTHO
Organizers

OWANDY

DENTIS
No.1 Partner in Implant Dentistry

siscon
swiss star dental implants



Odontos d nyanın  n  nd  ged n firmalarının Az rbaycandak  distrib toru olaraq h kimləri  n son dental material, instrument v  cihazlarla t min edir.  ox geni  m hsul se imin  malik firmamızda h m stomatoloji klinikalar, h m d  laboratoriyalar  c n g r kli olan b t n l vazimatları v  materialları tapa bil rsiniz. Stomatologiyanın b t n sah lərini  hat  ed n m hsulları il  Odontos ailəsi h r zaman xidm tinizd dir. M qs dimiz  n son yenilikləri, inki af  d nya s viyy sində i l r g r n d y rli h kimlərimiz   atdırmaq v  hamımız  c n qiym tli olan stomatologiyamızın inki af  naminə  limizdən g l ni etməkdir.

Bizi se diyiniz  c n t      l r.

H rm tl  Odontos ailəsi

Sürətli İş
Çox Ucuz Qiymət
Üstün Keyfiyyət

**DIGITAL
DENTISTRY**

DEFINITIVE 3D PRINTER

ZENITH

3D printer


- * Hissəvi və tam protezlər üçün Wax up
- * Dental modellər
- * Wax up casting
- * Cərrahi şablon
- * Şəffaf elayner



3D PRINTER LEADER
ZENITH

DENTIS


OneQ-SL Regular
(size Ø3.7, Ø4.2, Ø4.7, Ø5.2)

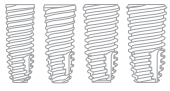

Ø3.7/4.2/4.7/5.2 Maxilla



Ø3.7/4.2/4.7/5.2 Mandible

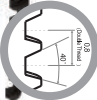

OneQ-SL Narrow
(size Ø3.0 Ø3.3)



Ø3.0/3.3 Maxilla



Ø3.0/3.3 Mandible



Bütün hallar üçün

OneQ-SL

İmplant sistemi

S.L.A. Səthlə daha sürətli osteointegrasiya


Birləşmə & Əlaqə

Mükəmməl ilkin fiksasiya üçün dizayn edilib

İdeal yumşaq toxuma həcmi

DENTIS

S-Clean OneQ Kit

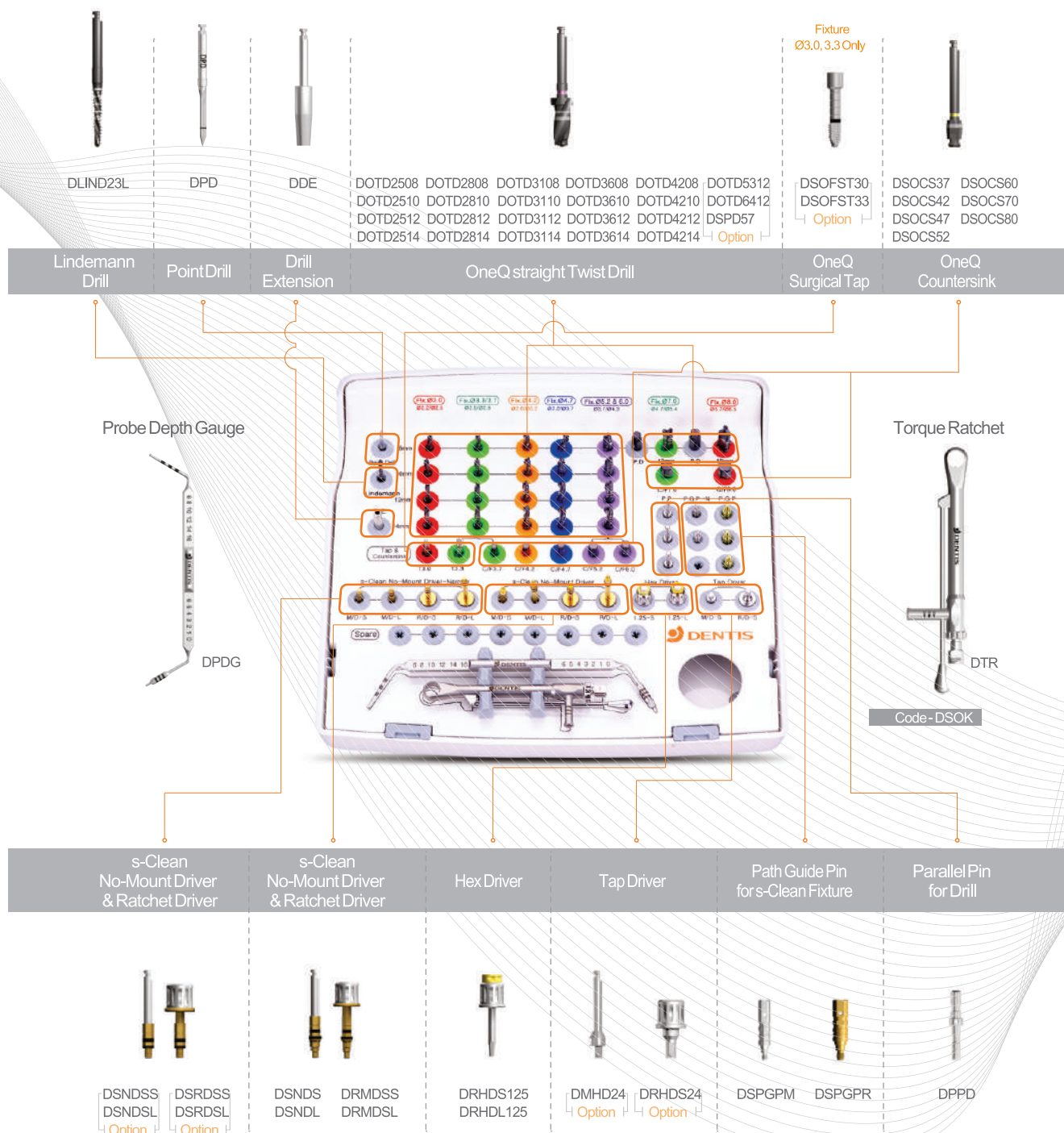

DENTIS

Sinus Lift Kit

Ad	Kod	Komponentlər	Ölçülər
Sinus Lift Kit	PTLTL0266FO	① Crest Approach Drill : 6EA ② Crest Bur : 4EA ③ Stopper : 5EA ④ Window Drill : 3EA ⑥ Case : 1EA	ø2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5 ø2.5/3.0/3.5/4.0 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0mm ø6.5/ ø6.5-1mm/ ø6.5-2mm




Krest Drill / Krest Rimer / Stopper

- İmplant qoyulacaq nahiyyədə sümüyün qalınlığını (hündürlüyünü) ölçün
- Stopperli krest drillə 1mm qalana qədər sümükə duva açın.
- Geri qalan 1mm sümüyü krest rimer vasitəsilə keçin, hansı ki, maxillar sinus zədələmir

Pəncərə Drili

- 1mm 2mm drill vasitəsilə lateral divarda 1mm. sümük saxlamaqla pəncərə açın
- Geri qalan 1mm sümüyü ø6,5 drill vasitəsilə keçin
- Açılan pəncərəni çıxarıb saxlayın. Daha sonra onu örtük kimi istifadə edə bilərsiniz
- Sinus lift alətlərini istifadə etməklə membranı qaldırın
- Bone Carrier və ya Sinus Lift No.5 istifadə etməklə boşluğu biomaterialla doldurun

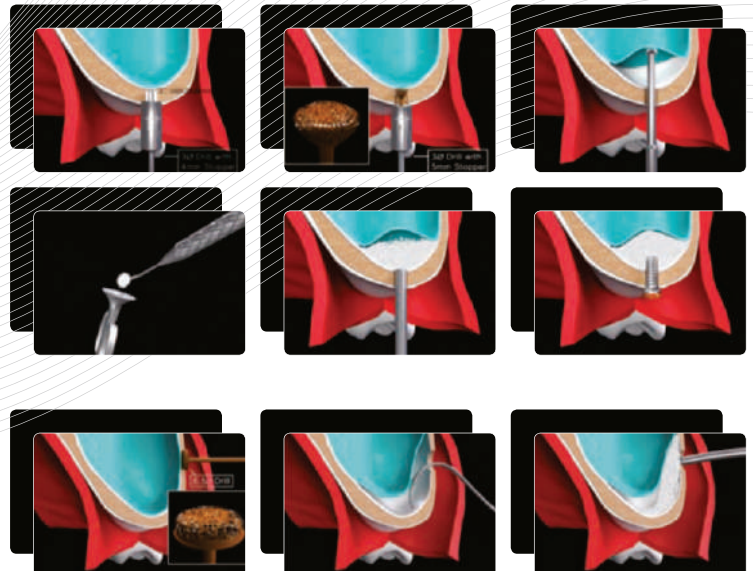

DENTIS

Sümük Genişlendirici (Bone Expander)

Ad	Kod	Komponentler	Ölçüler
Split Kit	MSTMCT0029	① Ratchet Wrench : 1EA ② Pilot Drill : 1EA ③ Bone Expander Tip : 5EA ④ Adapter : 2EA ⑤ Disc : 2EA ⑥ Spreader Set(Optional) : 3SET ⑦ Case : 1EA	Φ1.3 Φ1.8-2.6/Φ2.1-3.0/Φ2.4-3.4/ Φ2.7-3.8/2.9-4.3 Type A/B Φ7/Φ10

Xüsusiyyətləri

Tək və çox sayda implant yerləşdirilməsi üçün alətlər dəsti.

-Pilot Drill : İlk yuva açılması

-Bone Expander: Ensiz və ya zəif(aşağı keyfiyyətli) sümüklərdə bir implant yerləşdirilməsi zamanı sümüyün genişləndirilməsi və ya sıxlaşdırılması üçün istifadə olunur


-Spreader : Ensiz sümüklərdə çox sayda implant yerləşdirilməsi zamanı implantların ilkin fiksasiyasını artırmaq üçün istifadə olunur



Pilot drill & Sümük genişlendirici



Kəsici disk & Sümük aralayan

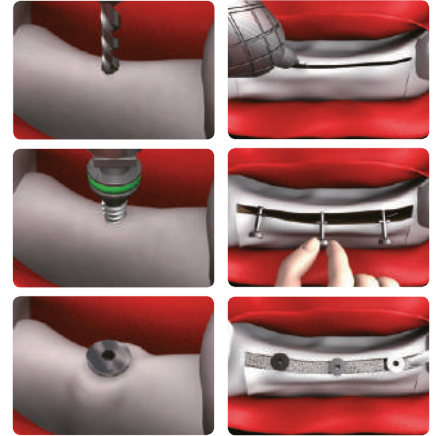

YBS kit


Ad	Kod	Komponentler	Ölçüler
YBS Kit	MSTMCT0071	① Bone Screw : 3SET(10EA/SET) ② Machine Driver : 1EA ③ Hand Driver : 1EA ④ Initial Drill(Optional) : 1EA ⑤ Case : 1EA	4mm 6mm 8mm



Fiksasiyaedici vintlər

-Yönləndirilmiş sümük regenerasiyası üçün ideal dəst

-Həm blok sümüklərin, həm də Titanium Meş və digər membranların fiksasiyası üçün rahatlıqla istifadə oluna bilər

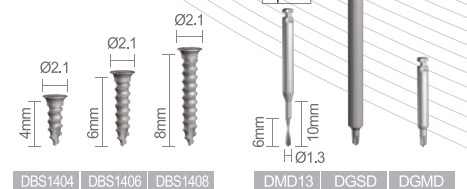


DENTIS

Birləşmiş diş əti formalaşdırılması

AD	Kod
Louis Button	DLB****

Louis Button hissələri

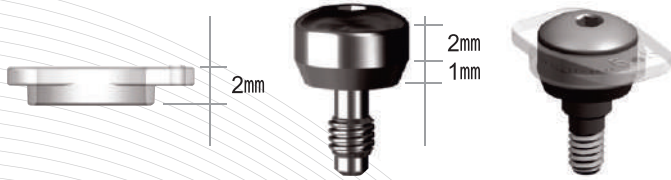


Sağalma başlığının hündürlüyü 3mm- den artıq olmalıdır

Xüsusiyyətləri


Tək		Cüt	
Kod No.	Diametr	Kod No.	Diametr
DLBS45	Ø4.5	DLBT45	Ø4.5
		DLBT50	Ø5.0
		DLBT525	Ø5.25
DLBS55	Ø5.5	DLBT55	Ø5.5
DLBS60	Ø6.0	DLBT60	Ø6.0
DLBS65	Ø6.5	DLBT65	Ø6.5

Kliniki hal


Lingual kəsik və apikala qaldırılmış tam flep

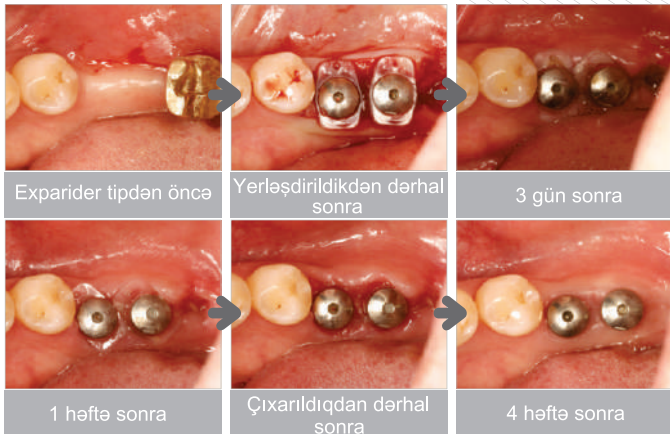



| Tikiş | ↓ | Louis Button |

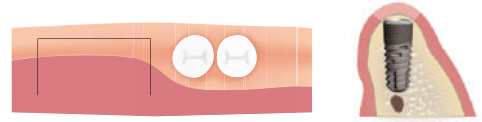

Alveol kənarda lingual tərəfdə kəsik aparılır ki, bukkal diş əti qorunsun



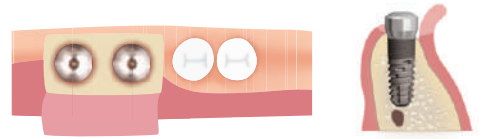


Keçid büküşünə doğru flep qaldırılır

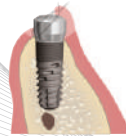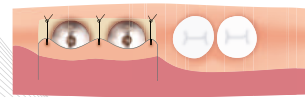

Tikiş sərbəstləşdirilir

3-5mm hündürlüyündə sağalma başlığı bağlanır və daha sonra Louis Button daxil edilir

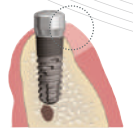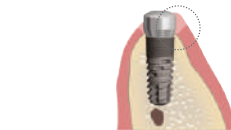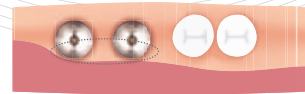

Birləşmiş diş əti xəttinin çəkilməsi

Diş əti sağaldıqdan sonra (7-10 gün) Louis Button- u çıxardın

RESORBA®

REPAIR AND REGENERATE

MOPİLEN

Monofilament polipropilen , steril, sorulmayan tikiş sapı

TƏSVİR

Mopilen izotaktik polipropilin (sintetik xətvəri poliolefindən ((C3H6)n) hazırlanmış steril monofilament sorulmayan tikiş sapıdır. Fərqləndirilə bilinməsi üçün Mopilen rənglərin.




GLYCOLON (QLİKOLON)

PGA/PCL

Steril, sorulan, sintetik tikiş materialı

TƏSVİR

GLYCOLON monofilament (tək lifli), sintetik, steril sorulan cərrahi sap olub, qlikol turşusu plimeri və kaprolaktandan ibarətdir. Xarakterik xüsusiyyəti cırılmaya (yırtılmaya) qarşı müqavimətin tez itməsidir.

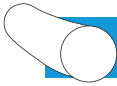

MOPYLEN


mavi, monofilament, sorulmayan

PGA RESOQUICK

steril, sorulan, sintetik tikiş sapı

TƏSVİR

PGA resoquick-sintetik , steril, cərrahi tikiş materialıdır. O qlikol turşusunun polimerindən hazırlanan sorulan sapdır. Hörlmüş struktura malik olan bu sapın üzəri rezolaktan ilə örtüldür. Üzəri inert olub kimyəvi reaksiyalara girmir, eləcə də antigen və pirogen xüsusiyyətlərə malik deyil. PGA resoquick üçün xarakterik xüsusiyyət dartılma (gərilmə) qüvvəsinin tez itməsidir.

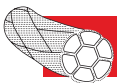

PGA RESOQUICK

boyaqsız, toxunma, qapalı, qısa müddətə sorulan

CAPROLON (KAPROLON)

Poli(laktid-kaprolakton)

Steril, sorulan, sintetik

TƏSVİR

Caprolon sintetik steril monofilament cərrahi tikiş materialı olub, sorulandır və laktik turşusunun kopolimeri və kaprolaktondan ibarətdir. Lifin sürüşkənliyini artırmaq və xüsusiyyətlərini işləmək üçün monofilament lif kalsium stearat və L-laktidin kopolimeri və kaprolaktunun qarışığı ilə örtülmüşdür. Örtülmə inert, nonantigenik, nonpirogenikdir.



CAPROLON

bənövşəyi / boyaqsız, monofilament uzun müddətə sorulan



GLYCOLON

bənövşəyi / rəngsiz monofilament, qısa müddətə sorulan

SEİDE/ SİLK – İPƏK

Xam ipək liflərinin Fibroini (Proteini)

TƏSVİR

Seide xam ipək liflərinin Fibroinindən hörlmüş sorulmayan cərrahi tikiş materialıdır. Bu material mumla örtülmüşdür. Bu liflərin kapilyarlığını azaldır, beləliklə hidrofobik liflər vasitəsilə hamar səth verir. Seide boyanmamış (ağ), boyanmamış (qara) və oftalmoloji cərrahiyyədə (VIRGIN SİLK) istifadə olunan (mavi, suda açılan) növləri mövcuddur. Seide müxtəlif qalınlıq, uzunluq, həmçinin iynə-sap kombinasiyasına görə fərqlənir. Seide Avropa Farmakologiyasının steril sorulmayan tikiş materialları üçün olan tələblərinə uyğundur.



SİLK „E“

qara / toxunma, sorulmayan

RESORBA®

REPAIR AND REGENERATE

POLYESTER

Polyester
Steril, sorulmayan sap

TƏSVİR

Polyester hörülmüş sorulmayan cərrahi sap olub, molekulyar formulu (C₁₀H₈O₄)n olan polietilen tereftalatdan ibarətdir. Polyester həm boyanmamış (ağ) həm boyanmış (yaşıl və qara) olur. Polyester Avropa Farmakologiyasının polietilen tereftalat materialdan olan steril saplar üçün olan tələblərə uyğundur.



SUPRAMİD

Steril, sorulmayan tikiş sapı


TƏSVİR

SUPRAMİD psevdomonofilament rezorbsiya olmayan cərrahi tikiş sapıdır. Onun səthinin poliamid 6, polimer ε kaprolaktam ilə örtülü olması bu sapa hamarlıq verir. Supramid həm rənglənməmiş (ağ) həm də qara rəngdə olur.



POLYESTER

yaşıl / ağ, toxunma, sorulmayan

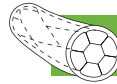

SUPRAMİD

qara / ağ, saxla-monofilant sorulmayan

RESOPREN

Polivinilid diflorid
Steril, sorulmayan


TƏSVİR

Resorpen Polivinilid diflorid materialından olan monofilament sorulmayan cərrahi sapdır. Resorpen göy rəngə boyanıb. Resorpen Avropa Farmakologiyasının steril sorulmayan tikiş materialı üçün olan tələblərə cavab verir.




PGA RESORBA

Sorulan, multifilament, hörülmüş, polilaktik turşusu ilə örtülmüş tikiş sapı. Boyanmış və boyanmamış halda mövcuddur. 14-21 gün ərzində dartılma(gərilmə) qüvvəsinin 50%-ni itirir. PGA Resorba qlolik turşusunun polimeridir. İncə, dəqiq, hörülmüş filamentlər yüksək dartılma qüvvəsi və elastikliyi təmin edir. Sorulan sap sağalma dövründə toxumaları yaxınlaşdırır və tədricən dartılma qüvvəsi azalır. Tikiş qoyulandan 14 gün sonra tikişin qalınlığından asılı olaraq PGA Resorba hələ 50% fəaliyyət göstərir.

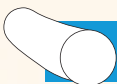

RESOPREN

mavi, mono filament, sorulmayan

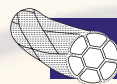

PGA RESORBA

bənövşəyi / rəngsiz, toxunma, qapalı orta müddətə sorulan

Hybrisun aesthetic

HYBRISUN aesthetic anterior və posterior dişlərin bərpası üçün işıqla bərkiyin universal mikrohibrid kompozitdir. Optimal konsistensiyası və rəng seçimi qat-qat texnikası ilə ön ön dişlərin individual plomblanmasına, həm də okkluzial posterior plomblamada istifadəyə imkan verir. Tərkibindəki filler kombinasiyası restovrasiyanın stabilliyinə qərantıya verir. Buqələmun (xameleon) effekti, təbii şəffaflıq və yüksək cilalanma qabiliyyətinə malikdir. Bütün bu xüsusiyyətlər plombun təbii estetik görünüşünə imkan verir. HYBRISUN aesthetic radiopakdır və geniş rəng seçiminə malikdir.



Hybrisun aesthetic flow

Hybrisun aesthetic flow radiopak, işıqla bərkiyən axıcı mikrohibrid kompozitdir. Hybrisun aesthetic flow mikro preparasiyalarda, boyun nahiyyəsinin defektlərində, fissurlarda, kompozit və keramika restovrasiyaların fiksasiyası və yenidən bərpasında, həmçinin kompozitlə bərpa zamanı ilk qatın qoyulması zamanı istifadə olunur. Hybrisun aesthetic flow optimal axıcılıq xüsusiyyətlərinə malikdir, bu ideal konsistensiyasına görə axıcıdır ancaq istifadə zamanı damcıdamır və yaxşı stabilliyə malikdir.

Bu səbəbdən Hybrisun aesthetic flow ən kiçik boşluqlarda, undercut.larda (dişətinə yaxın nahiyyələrdə) və Hybrisun aesthetic.lə birgə rahatlıqla və dəqiqliklə istifadə edilir. Hybrisun aesthetic flow.nun transparantlığı (şəffaflığı) qoyulmuş plombun qonşu təbii dişlə uyğunlaşmasına səbəb olur (xameleon effekt). Hybrisun aesthetic flow ən çox istifadə rənglərdə mövcuddur. Hybrisun aesthetic flow yüksək estetik tələblərə cavab verir, genişistifadə imkanlarına sahibdir və ekonomikdir.



Hybrisun classic flow

Hybrisun classic flow radiopak, işıqla bərkiyən axıcı universal mikrohibrid kompozitdir. Hybrisun classic flow işığı təbii dişlərdəki kimi əks etdirməqabiliyyətinə malikdir və mikro preparasiyalarda, boyun nahiyyəsinin defektlərində, , fissurlarda, kompozit və keramika restovrasiyaların fiksasiyası və yenidən bərpasında, kompozitlə bərpa zamanı ilk qatın qoyulması zamanı istifadə olunur. Optimal konsistensiyası Hybrisun classic flow.nun damcıdamasına imkan vermir və istifadəni asanlaşdırır. Buna görə də materialın yüksək stabilliyinə qərantıya verilir. Yüksək cilalanma qabiliyyətinə malikdir və yeyilməyə qarşı davamlıdır. Hybrisun classic flow ən çox istifadə rənglərdə mövcuddur.



Hybrisun nano

HYBRISUN nano nanotexnologiya ilə istehsal olunan, mikrohibridin tipik xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən işıqla bərkiyən universal kompozitdir. Ölçü stabilliyi yüksəkdir və yeyilməyə qarşı davamlıdır. Radiopakdır və I,II,III,IV və V sinif boşluqlarda, kompozit inleylelərdə, rəngi dəyişmiş dişlərdə isə kompozit vinir kimi istifadə oluna bilər. HYBRISUN nano ultrabənövşəyi şüa altında təbii floresens (ışığı əks etdirmə) göstərir. Alətə yapışmır, ön və arxa dişlərdə rahatlıqla istifadə edilir. Emal, dentin və transparentin geniş rəng çalarında mövcud olması estetik nəticələr əldə etməyi asanlaşdırır. Tərkibindəki fillerlərin kombinasiyası arzu olunan buqələmun(xameleon) effektini, floresensi və şəffaflığı əldə etməyə qərantıya verir. HYBRISUN nano N-bond və C-Prime S plus kimi adi adgeziv sistemlərlə istifadə oluna bilər. HYBRISUN nano flow ilə kombinasiyası bütün sinif boşluqlarda optimal istifadəyə imkan verir.



HYBRISUN nano flow

Hybrisun nano flow nano texnologiyaanın ən son nailiyyətlərini özündə əks etdirən, axıcı kompozitin tipik xüsusiyyətlərinə malik yeni axıcı plomb materialıdır. Hybrisun nano flow boşluğun divarlarını yüngül nəmləndirir və istifadə zamanı yaxşı axıcılıq qabiliyyətinə malikdir. Hybrisun nano flow ultrabənövşəyi şüa altında təbii floresens (ışığı əks etdirmə) xüsusiyyətinə malikdir və mikro preparasiyalarda, boyun nahiyyəsinin defektlərində, fissurlarda, kompozit və keramika restorasiyaların fiksasiyası və yenidən bərpasında, həmçinin kompozitlə bərpa zamanı ilk qatın qoyulması zamanı istifadə olunur. Hybrisun nano flow optimal axıcılıq xüsusiyyətlərinə malikdir, bu ideal konsistensiyasına görə axıcıdır ancaq istifadə zamanı damcıdamır və yaxşı stabilliyə malikdir. N-Fill və N-Bond-la birgə istifadəsi Hybrisun nano flow.nun geniş tətbiqinə imkan verir. Yüksək cilalanma qabiliyyətinə malikdir və yeyilməyə qarşı davamlıdır. Hybrisun nano flow ən çox istifadə rənglərdə mövcuddur.



Hybrisun classic

Hybrisun classic anterior və posterior dişlərin bərpası üçün istifadə olunan işıqla bərkiyən universal mikrohibrid kompozitdir. Plastik konsistensiyası, geniş rəng seçiminə görə material həm klassik üsulla həm də qat-qat texnikası ilə plomblama üçün uyğundur. Hybrisun classic cilalanan zaman yüksək parlaqlıq göstərir və bu da estetik nəticələr əldə etməyə imkan verir. Tərkibin mükəmməlliyinə görə Hybrisun classic yeyilməyə qarşı davamlıdır, uzun ömürlüdür və rəngini dəyişmir. Hybrisun classic radiopakdır və işığı əks etdirmək qabiliyyəti təbii dişdəki kimidir. Homogen strukturu və tərkibindəki seçilmiş fillerlərin hesabına xameleon effektinə malikdir və işığı əks etdirmək qabiliyyəti təbii dişlərdəki kimidir. Yüksək cilalanma bilmə qabiliyyəti rəngin uzun müddət saxlanmasına və təbii estetik görüntünün əldə olunmasına imkan verir.



MTA ALƏTLƏR



Yellow porcelain etch + Silan

Yellow porcelain etch körpünün, həkim kabinetində, birbaşa pasiyentin ağız boşluğunda bərpasına imkan verir. Yellow porcelain etch körpülərin bərpası zamanı keramikanın turşulanması, həmçinin keramik(porselen) vinirlərin, qapaqların, və inleylərin sementləmədən öncə turşulanması üçün istifadə edilir. Silane isə bond sistemindən əvvəl, turşulamadan sonra keramikanın üzərinə çəkilir, bu rezinlə keramika arasında yapışmanı daha davamlı(möhkəm) edir.



Chloraxid extra

Kanalları yumaq üçün maye

Chloraxid 2% extra ; tərkibi- sodium hipoxlorid 2 %, surfaktantlar

Chloraxid 5.25% extra; tərkibi -Sodium hipoxlorid 5.25%, surfaktantla

Daha yaxşı nüfuz etmə Daha yaxşı stabillik*Daha uzun müddətli təsir

Kanalın mexaniki genişləndirilməsi zamanı pulpa qalıqlarını kənarlaşdırır. Kanalı təmizləyir və dentil kanalcıqlarının ağzını (girəcəyini) açmaq üçün smer təbəqəsini kənarlaşdırır.Kanallar dolduqdan sonra dişin rənginin dəyişməsi



Hydrocal

Pasta hazırlamaq üçün Kalsium hidroksid

Tərkibi: Calcium hydroxide 30%

Kök kanallarının müvəqqəti doldurulması

İnfeksiyalaşmış kanalların müalicəsi

Hissəvi dekalsifikasiya olmuş dentinin üzərinin örtülməsi zamanı onun remineralizasiyasına səbəb olur

Pulpanın indirekt örtülməsi zamanı müalicəvi sarğı(örtük) kimi istifadə olunur, dentin körpüsünün yaranmasını stimulyasiya edir

Geriye dönməyən pulpit və pulpanın nekrozu zamanı, eyni zamanda periapikal toxumaların iltihabı zamanı kanalların dezinfeksiyası

üçün inlay kimi istifadə olunur Periapikal toxumaların davamlı iltihabı zamanı müvəqqəti kanal doldurucu kimi istifadəsi sümüyün

yenidən bərpasını stimulyasiya edir.

Süd dişlərində daimi kanal doldurucu kimi

Qırılmış köklərdə kanal doldurucu kimi

Dişin apeksinin bioloji bağlanması (doldurulması)



Zinc Oxide

Pasta hazırlamaq üçün toz şəklində material

Zinc Oxide əsasən evgenollu pastalar hazırlamaq üçün istifadə olunur. O müvəqqəti plomb kimi, fissurların örtülməsi üçün material kimi, müvəqqəti və daimi sement kimi və kök kanallarının doldurulması üçün cərrahi sement kimi istifadə olunur.

Tərkibi: Zinc oxid 100 %

İstifadəsi

Müvəqqəti plomb materialı kimi

Müvəqqəti və daimi sement materialı kimi

Müvəqqəti kanal doldurucu kimi

Cərrahi sement kimi

Antibakterial təsirə malikdir və yara sağlamlığını sürətləndirir.



Hydrocal

Kanalları müvəqqəti doldurmaq üçün kalsium hidroksid əsaslı pasta.

Tərkibi: Kalsium hidroksid.



Canal Detector

Dar və aşkar olunması çətin olan kanallara vurulur. Mavi rəngdə olması kanalın tez aşkarlanmasına imkanı yaradır.



Eucalyptol

Qutla perçanı kanalda əritmək üçün məhlul.

Tərkibi: Evkalipt yağı.



Evgenol

Pasta düzəltmək üçün maye.

Tərkibi: Mixək yağı (oleum Caryophylli).



Calcipast

Kalsium hidroksid tərkibli müvəqqəti pasta. Tərkibi: Kalsium hidroksid 16% istifadəsi;

*Pulpanın birbaşa və ya dolayı örtülməsi üçün bioloji sarğı kimi *kök kanallarının müvəqqəti doldurmaq üçün Xüsusiyyətləri;

*Pulpanı termo-elektrik qıcıqlardan müdafiə edir. *İltihabı azaldır *Zədələnmiş periapikal toxumaların bərpasını

və odontoblastlar tərəfindən bərpəedici (əvəzedici)

dentinin yaranmasını stimullaşdırır. *Eksudatın kök kanal sisteminə nüfuz etməsinin qarşısını alır. *antibakterial təsir göstərir

*Ən mühüm üstünlüyü uzun müddətli anti bakterial təsiri və minerallaşmış bariyerlərin yaranmasını stimullaşdırmaqdır.



Calcipast +i

Barium sulfat və yodoformla zənginləşdirilmiş kök kanallarını müvəqqəti doldurmaq üçün kalsium hidroksid pasta Tərkibi: kalsium hidroksid 10%, yodoform 30% Xüsusiyyətləri; *İltihabı azaldır *quruducu təsiri var *Zədələnmiş periapikal toxumaların bərpasını və odontoblastlar tərəfindən əvəzedici dentinin yaranmasını stimullaşdırır. *Eksudatın kök kanal sisteminə nüfuz etməsinin qarşısını alır. "Calcipast +i"nin tərkibindəki yodoform quruducu və bakteriosit təsiri gücləndirir. O həmçinin virus və göbələk əleyhinə də təsir göstərir. Infeksiyalaşmış kök kanallarında istifadəsi məsləhət görülür.



Calcipast Forte

Kök kanallarını müvəqqəti doldurmaq üçün kalsium hidroksid tərkibli pasta Tərkibi: kalsium hidroksid 10%, yodoform 73%, p-xlorfenol 2 % *Tərkibindəki yüksək konsistensiyalı Kalsium hidroksidin hesabına dişləri yenidən minerallaşdırır. *Zədələnmiş periapikal toxumaların bərpasını sürətləndirir. *Quruducu və bakteriosit təsir göstərir *Tərkibindəki yüksək qələvi reaksiyanın hesabına sərtləşmiş.



MTA+ Standart

Kök kanallarının bərpası və doldurulması üçün material MTA+ xüsusilə aşağıdakı hallarda istifadə olunur. Kök kanal zədələrinin demineralizasiyası Apeksin revers doldurulması Birbaşa pulpanın üzərinin örtülməsi Pulpanın amputasiyası Kökləri tam formalaşmamış dişlərin müalicəsində



STANDART



MAXI



PRO



K files



H files



Lentulo



Lentulo with spring



Gates



Fingerplugges



Diş kanalını genişləndirmək üçün alət (Reamer)

Kiçik spiral formalı burğac. İtilənmiş olması burğu zamanı effektivlik verir və sirkulyar kanal bölməsini formalaşdırmağa kömək edir.

İstifadəsi: burulma saat əqrəbi istiqamətində maksimum 90° olmalıdır.

Uzunluq: 21, 25, 28, 31 mm

ISO ölçüləri: 06 - 140, 15/40, 45/80, 90/140

Qablaşdırma: hər qutuda 6 alət



06	08	10	15	20	25	30	35	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----

45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

K-Fayl

Geniş spiral formalı burğac. Kanalın divarını hamarlamaq imkanı verir.

İstifadəsi: burulma saat əqrəbi istiqamətində maksimum 45° olmalıdır.

Uzunluq: 21, 25, 28 və 31 mm

ISO ölçüləri: 06 - 140, 15/40, 45/80 və 90/140

Qablaşdırma: hər qutuda 6 alət



06	08	10	15	20	25	30	35	40
----	----	----	----	----	----	----	----	----

45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

H - Fayl

Ən geniş spiral formalı burğac: Kəsici olması təkanda və dartmada əla effekt verir. Bu kəsicilik effekti kanal doldurulmasında da istifadə edilir.

Xəbərdarlıq: Faylı istifadə etməzdən əvvəl kanalı yoxlayın. Əgər burucu hərəkət zamanı alət həddindən artıq dərinə daxil olarsa, faylı sındıra bilər.

Uzunluq: 21, 25, 28 və 31 mm

ISO ölçüləri: 06 - 140, 15/40, 45/80 və 90/140

Qablaşdırma: hər qutuda 6 alət



08	10	15	20	25	30	35	40
----	----	----	----	----	----	----	----

45	50	55	60	70	80	90	100	110	120	130	140
----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----

Pulpoekstraktor

Pulpa toxumasını kanaldan çıxarmaq üçün hazırlanıb.

İstifadə: aləti kanala salın, 180°-də fırladın və sonra çıxarın.

Uzunluq: 21 və 25 mm

ISO ölçüləri: 20 - 60, 25/40 və 25/60

Qablaşdırma: hər qutuda 6 alət



20	25	30	35	40	50	60
----	----	----	----	----	----	----




Cilalama üçün borlar

Bu borlar plombdan sonra dişlərin, habelə tac və körpülərin cilamasında istifadə olunur.



Almaz disklər

Almaz disklər akril və keramika, eləcə də tac və körpülər üzərində işləmək üçün ən mükəmməl vasitələrdən hesab olunur. Konturların müəyyən edilməsi və separasiya işləri üçün xüsusi formalı disklər də istehsal edilir.

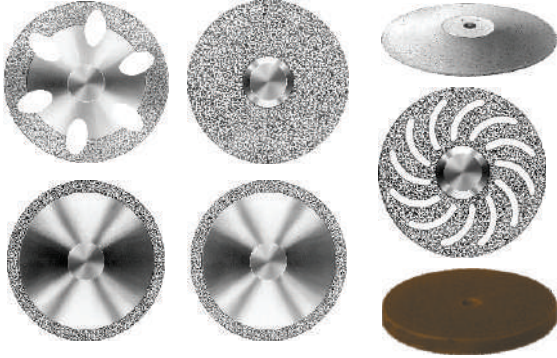

Abrazivlər

Dərhal cilamanı həyata keçirmək üçün qəhvəyi rəngli, metal üzərində cilamanı həyata keçirmək üçün isə çəhrayı rəngli abrazivin istifadəsi məsləhət görülür. Keramikanın və digər metalların cilalanması üçün müxtəlif sərtliyə malik rezin disklərdən də istifadə edilir.



İstənilən formalı almaz borlar

Yüksək dəqiqliyi təmin etmək üçün bu borlar yalnız xırdalanmış poladdan hazırlanır. Stomatoloqların işini yüngülləşdirmək üçün D+Z borları demək olar ki, bütün forma və ölçülərdə istehsal olunur.



**Keramika
cilalama dəsti**



**Dişləri qapaq altına
hazırlamaq üçün dəst**



**Protezləri
cilalama dəsti**




**Dr. Woon-nun
dişləri qapaq altına
hazırlamaq üçün dəsti**



**Narın almazlı cilalama
dəsti**




**Dr. Lusunbokun
dişləri qapaq altına
hazırlamaq üçün dəsti**

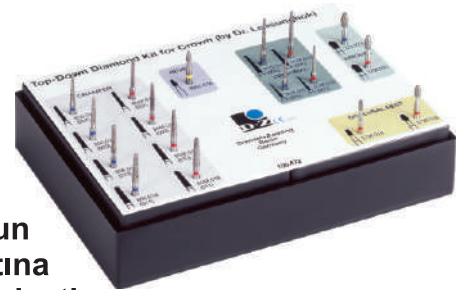

**Terapiya
dəsti**



**Dr. Woon-nun
inlay bor dəsti**

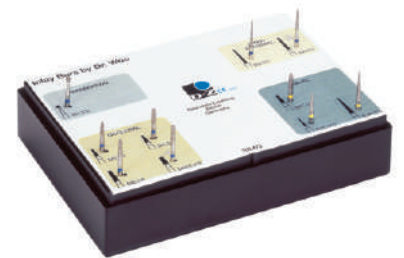

**Dişləri koronal və
vinir üçün
hazırlama dəsti**



DENFIL Light

Cured hybrid composite resin

- * İşıqla bərkiyən mikro hibrid kompozit rezin olub həm anterior, həm posterior dişlərin bərpasında istifadə olunur
- * Tərkibindəki qeyri-üzvi fillərlərin hesabına polimerizasiya zamanı büzülmə (həcmi dəyişmə) minimumdur və mükəmməl marginal kipliyə və səth xüsusiyyətlərinə malikdir
- * Denfil çox möhkəm və sürtünməyə qarşı davamlıdır
- * Radiopakdır
- * Həmçinin Denfil optimal özlülüyə malikdir, bu da işi asanlaşdırır

İstifadəsi

- * Ön və arxa dişlərin bərpası
- * Qapaq altına dişlərin hazırlanması

Qutu- 5x4 qr şpris(A1,A2,A3,A3,5)
1X3ml turşu
1x5 ml bond
Rəng şkalası
Şotka başlıqları,şpatel,qarışdırma qabı, mavi başlıqlar

Paket- 1adad 4qr Refill



DENFIL Flow

İşıqla bərkiyən axıcı kompozit rezin

- * Denfil işıqla bərkiyən radiopak axıcı kompozit olub optimal axıcılığı həm dərin boşluqlarda, həm də boyun nahiyyəsində istifadəyə imkan verir
- * Mükəmməl rəng uyğunluğu, təbii estetika, yüksək cilalanma xüsusiyyəti
- * Denfil xüsusi hallar üçün 2 müxtəlif özlülüyə(viscosity) malik şpris təklif edir
- * High viscosity type(yüksək özlü) (A1,A2,A3) boyun nahiyyəsində effektivdir
- * Low viscosity type (aşağı özlü) (A1,A2,A3) daha dərin boşluqlarda effektivdir

İstifadəsi

III, V sinif boşluqlarda və IV sinif kiçik boşluqlarda I və II sinif boşluqlarda Base/liner kimi
Müvəqqəti rezin, keramika və akrilik materialların bərpasında
Minimum yonulmuş boşluqların bərpasında
Qapaq altına dişlərin hazırlanmasında

Qutu- 4x 2qr şpris A1 A2 A3,5
20 qara ucluq

Paket- 1x 2qr şpris A1 A2 A3,5
10 qara ucluq



DENFIL Nano

İşıqla bərkiyən nano-hibrid kompozit material

* Denfil Nano həm anterior həm də posterior dişlərin bərpasında istifadə olunan, işıqla bərkiyən, radiopak nano-hibrid kompozitdir

İstifadəsi

* DenFil™ N posterior dişlərin I,II,V sinif boşluqlarında, anterior dişlərin III,IV,V sinif boşluqlarında, boyun nahiyyəsindəki defektlərdə, həmçinin kök səthində istifadə olunur

Qutu- 5x4 qr şpris(A1,A2,A3,A3,5)

1x3ml turşu

1x5 ml bond

Rəng şkalası

Şotka başlıqları,şpatel,qarışdırma qabı,
mavi başlıqlar



DENFIL Turşu

- * Denfil Etchant yarım- gel tipində fosfat turşusu
- * Yarım-gel tipi istənilən bölgədə istifadəni asanlaşdırır
- * Tez effekt göstərir və səthdən asanlıqla kənarlaşdırılır
- * Səthdə heç bir qalıq buraxmır



SPACER

İşıqla bərkiyən müvəqqəti plomb materialı

- * Tərkibində nano ölçüdə gümüş olan işıqla bərkiyən müvəqqəti plomb materialıdır
- İnlay,onlay-lərin hazırlanması zamanı müvəqqəti restorasiya kimi istifadə olunur
- * Yüksək elastikliyə və davamlılığa malikdir
- * Dişin kənarları ilə sıx birləşib diş əti altına sızır

İstifadəsi

- * İstifadəsi zamanı heç bir əlavə qarışıq ehtiyac yoxdur
- * Bəşludən asanlıqla xaric edilə bilər



Dental şiftlər



Xaç formada başlığı olan qızılı rəngli şift



Xaç formada başlığı olan polad şift



Xaç formada başlığı olan titan şift



Kompozit başlığı olan titan şift

Kompozit sement (Lamel)

Kompozit sement olan Lameldən istifadə zamanı bonda ehtiyac yoxdur. Bu material bilavasitə təmiz hissəyə və ya ehtiyac olduqda kanala belə qoyula bilər. Lamel vurulmuş kompozit şifti kanala qoyduqdan sonra, bu vəziyyətdə 20-30 saniyə saxlamaq lazımdır. Lameli həmçinin kompozit sementlərin istifadə olunduğu sahələrdə də tətbiq etmək olar.



Glassix Plus

Şüşə ionomer şift

Bu məhsul öz sinfinin ən son məhsuludur.

Üstünlükləri:

- Optimal rentgenokontrast olması
- Elastikliyin təbii dentinə yaxın olması (20 Gpa)
- Mexaniki dözümlülüyünün 1500 Mpa olması



Ölçü kağızı (Blue Red Radar)

Daha dəqiq ölçü götürmək üçün kağız.



Glassix

Şüşə ionomer şift olub, öz tərkibi etibarilə digər şiftlərdən üstündür. Belə ki, o sınıma davamlıdır. Bu şift dentinə absorbsiya olub, onunla birlikdə stress və zərbələrə müqavimət göstərə bilər. GLASSIX şiftləri 3 ayrı diametrdə istehsal olunur. Bu şiftlərin uzun olması isə istifadəni daha da asanlaşdırır.



Fiksatorlar (Retention Pins)

- Paslanmayan titan
- Stress yaratmayan
- Yumşaq kəsik imkanı
- Yüksək stabillik



DETAFORM

İstifadəyə hazır müvəqqəti plomb olan Deraferm özündə reminerallaşdırmaya səbəb olan florid kalsiumu hissəciklərini daşıyır. Plomb ağız boşluğunda su ilə təmas yaranan kimi bərkiyir və yüksək yapışqanlıqə malik olur. Onun dişlərdən təmizlənməsi də çətinlik törətmir.

Rəng: ağ opak

Qablaşdırma: Detaferm standart qablaşdırma - 40qr



DETASEAL HYDROFLOW LITE

Dəqiq ölçülərin alınması üçün nəzərdə tutulmuş, aşağı axıcılığı olan, yüksək hidrofiliyə malik korreksiya edici material (əlaqə dərəcəsi <10). Sulu hissədə ən xırda hissələrin dəqiq əks olunması özəlliyinə malikdir. Materialın ağız boşluğunda termohəssas xarakterə malik olması quruma müddətini azaldır. Qəlibdən çıxarılan zaman elastiki olan Detaseal hydroflow lite , həm də qırılmaya və deformasiyaya qarşı xüsusi dözümlülüüyü ilə seçilir.

Rəng: Əsas pasta - çəhrayı, Katalizator - ağ 1:1 nisbəti Quruma vaxtı: Normal quruma - 4 dəq (işləmə vaxtı 2 dəq + ağızda quruma 2 dəq) Tez quruma - 2,3 dəq (işləmə vaxtı 1 dəq + ağızda quruma 1:30 dəq)

Qablaşdırma: Əsas pasta + katalizator – 2x50 ml Qarışdırılma ucluqları, sarı rəngli – 12 ədəd



DETESEAL HYDROFLOW PUTTY

Ölçülərin alınması üçün nəzərdə tutulmuş, yüksək yapışqanlıqə malik, yağrula bilən material. İlk formada elastik olması qarışdırılma zamanı əla nəticələrin alınmasına gətirib çıxarır. İki etaplı və iki fazalı ölçü alma zamanı ideal bazis materialıdır. Onu həmçinin fərdi qaşıqların düzəldilməsi üçün də istifadə etmək olar. Xüsusi elastikliyi sayəsində qəlibdən çıxarılma zamanı heç bir deformasiyaya məruz qalmır ki, bu da iş prosesini yüngülləşdirir. Tez qarışdırılma bilməsi və quruma müddətinin uyğunluğu (yalnız 2 dəq), eləcə də, neytral dadı malik olması hər iki tərəfi razı salır.

Rənglər: əsas pasta - yaşıl katalizator - ağ 1:1

Qablaşdırma: əsas pasta -250ml katalizator - 250ml qarışdırmaq üçün qaşığı - 2ədəd



ESTHETIC MASK

A silikon əsaslı material olub, texniki diş eti əvəzləyicisi hazırlanmasında istifadə olunur. Yumşaq və elastik olması ilə birgə, həmçinin kifayət qədər dözümlü struktura malikdir. İşlənməsi çox rahatdır. Onun möhkəmliyi Şoru göstəricisinə görə 45A-dır. Həm şpris, həm də 1:1 nisbətində katric qablaşdırılması mövcuddur.

Rəng: Əsas pasta - diş eti çəhrayisi Katalizator-ağ 1:1

Qablaşdırma: Katric - 2*50ml Qarışdırıcı ucluqlar, sarı rəng - 10 ədəd

Silicon - izoləedici sprey - 15ml



EXAPLAST

C – silikon əsaslı, bütün növ ölçülərin alınmasına tətbiq oluna bilən, dəqiq ölçü materialıdır. Müəyyən rəng fərqlərinin olması hesabına qarışma proseduru tam formada idarə edilə bilər. Həmçinin "nanə" dadının hiss olunması pasientə də rahatlıq bəxş edir. Exaplast putty – yumşaq, hamar, ilkin tutarlılıq, yüksək elastiklik və son sərtlik işi tam asanlaşdırır və ölçünün stabil qalmasını gücləndirir. Exasoft wash - Əla axıcılıqə, aşağı yapışqanlıqə və hidrofiliyə malikdir. Deformasiyaya uğramadan alınan formanın saxlanması bacarığı, eləcə də, qırılmağa qarşı möhkəmlik və ölçülərin detallı əks olunması imkanı. Exagel cat – allergik reaksiya və qıcıqlanma törətməyən, xoşagələyən iy və dadı olan aktivləşdirici gel

Rənglər: Putty - sarı Wash - bənövşəyi Cat – göy

Qablaşdırma: Putty - 910ml Wash - 140 ml Cat - 60 ml



MOLLOPLAST B

Yumşaq plastik material diş laboratoriyalarında hazırlanan protezlərin daimi prebazirovkası üçün tətbiq olunur. Birkomponentli silikon, isti polimerizasiya ilə sobalarda bişirilmək üçün nəzərdə tutulub. Hər cür bazis protez materiallarına optimal adgeziyası ilə seçilir. Vakum doldurulma texnologiyası hesabına bakteriya təbəqəsinin yaranmasının qarşısını alır. Molloplast B məhsulunun xüsusiyyətləri klinik yoxlamadan keçmiş və elmi sənədləşdirilmişdir.

Qablaşdırma: Molloplast B - 45qr



MOLLOSIL PLUS

A silikon əsaslı birbaşa və uzun müddətli yenidən qurmaya (rebasings) xidmət edən yumşaq və özübərkiyən material. Birbaşa olaraq katriçdən protezin üzərinə vurulur. Bütün növ akril materiallar üzərinə güvənli yapışır. Praymerin rəng idikatoruna malik olması materialın vurulmasının visual idarə edilməsini təmin edir.

Rəng: Diş eti rəngində

Qablaşdırma: automix 2 - 50ml qarışdırma ucluğu, bənövşəyi rəngdə - 7 ədəd
mollosil plus praymer - 5ml mollosil plus politura - 2x7ml cilalama ucluğu - 1 ədəd
cilalama frezi - 1 ədəd sprey - 5x15ml pasient üçün broşura - 10 ədəd pipetka - 2 ədəd



SMARTFLORID LACQUER

Şəffaf olan bu florlakın tərkibində aminoflorid əlavələri var. Onun florid kalsium ilə zəngin olması materiala uzunmüddətli təsir göstərmək imkanı verir. Dişin boyun hissəsinin, eləcə də, dentin və emalin remineralizasiyası hesabına kariesin intensiv profilaktikası gerçəkləşir. Termik və mexaniki təsirlərə qarşı xüsusi müdafiə qatının yaranması mümkün olur. Xüsusi, uzun fırçalar hesabına dəyişdirilmə, optimal adgeziya, tez quruyan, portağal dadlı material.

Qablaşdırma: kiçik butulka - 10ml elastik fırça, göy rəngli - 20 ədəd



SMARTPROTECT

Müvəqqəti protezlərdən istifadə zamanı emal və dentində yaranan yüksək həssaslığı aradan qaldırmağa kömək edən məhlul. O, həmçinin dişlərin boynunda olan həssaslığın qarşısını alır. Dentin kanalcıqlarının qapaması hesabına məhlulun təsiri tez hiss olunur. Birdəfəlik fırçalar vasitəsilə tətbiq oluna bilər.

Qablaşdırma: smortprotect qabı - 7ml fırçalar - 20 ədəd təlimat kitabı - 1 ədəd



TEMOPFIT REGULAR 1:1

Özü bərkiyən standart bio-akril kompozit materialdır. Qısa və uzun müddətli müvəqqəti dəqiq protezlərin hazırlanması üçün nəzərdə tutulub. Hazırlanan dişlərin təbii, estetik, yarımsəffaf olması ilə seçilən material, həmçinin rəng çalarını uzun müddət saxlaya bilər. Əyilmə və sınımaya qarşı dözümlü olmaqla yanaşı, o həmçinin abraziyaya qarşıdır. Yüksək möhkəmlik və qısa quruma vaxtı Tempofiti fərqli edən digər xüsusiyyətlərdəndir. Elastik xüsusiyyətlərə malik olduğu üçün çıxarılması asandır. Materialın quruması zamanı ondan ayrılan istilik də aşağıdır.

Rənglər: A1, A2, A3, A3.5

Qablaşdırma: katriç (75qr) - 50ml
qarışdırma ucluqları, göy rəngli, qısa - 10 ədəd



FERMIN

İstifadəyə hazır müvəqqəti plomb materialı olan Fermin illərin sınağından uğurlu keçmişdir. Ağız boşluğunda su ilə təmas yaranan kimi bərkiməyə başlayan material güclü yapışmaya malikdir. Onu həmçinin təmizləmək də olduqca asandır.

Rəng: ağ opak

Qablaşdırma: Fermin standart qablaşdırma - 40qr



GREENBITE APPLE

A silikon əsaslı, orta axıcılığa və orta yapışqanlığa malik olan dişləmin alınmasına xidmət edən materialdır. Dişlərin üzərinə birbaşa tətbiq edilməsi sərf olunan vaxtı azaldır. Vurulması zamanı materialın diş aralarına axması halı baş vermir. Ümumiyyətlə Greenbite apple-in dişin üzərindən çıxarılması olduqca rahatdır. Ağız boşluğunda tez bir zamanda quruyan (təqribən 60 san) materialın son maksimal möhkəmliyin 45 D – dir. Yaşıl alma dadı ilə pasientlərə xüsusi xoş təsir bağışlayır.

Rəng: əsas pasta - yaşıl katalizator - sarı 1:1

Qablaşdırma: əsas pasta + katalizator - 2x50ml qarışdırma ucluğu, yaşıl rəngdə - 12ədəd kontur ucluqları - 12ədəd



İMLANTGEL PERIO

1,1% hyaluron turşusundan hazırlanan bu gel implantasiya zamanı, xüsusi ilə müvəqqəti super konstruksiyaların istifadəsi müddətində yumşaq toxumaya qulluq üçün nəzərdə tutulur. Tərkibində olan hyaluron natriy biotexnoloji məhsuldur (yəni qeyri-heyvani mənşəlidir). Xüsusiyyəti etibarilə şəffaf gel formasındadır.

Rəng: şəffaf

Qablaşdırma: Blister qablaşdırılmasında b/d şprislər -2x1ml Ucluqlar, göy rəngli, küt - 4ədəd



İMLANTLINK SEMI FORTE

Plasmas əsaslı (4:1) sement olub, implant üstü konstruksiyaların yapışdırılması üçün nəzərdə tutulub. Fərdi, xüsusilə böyük olmayan abatmentlər üçün müvəqqəti sement kimi də istifadə edilir. Böyük ortopedik konstruksiyaları uzun müddət keçəndən sonra da heç bir zərər dəymədən çıxartmaq mümkündür. Sıxılma zamanı sementin artıq qalan hissəsinin kənarlardan çıxması hesabına implantlink semi forte – nin diş üzərinə oturması optimal formada olur. Bütün növ materiala uyğunluq təşkil edən implantlink semi forte, həmçinin ikili qurumaya malikdir.

Rəng: təbii opak

Qablaşdırma: Katric mini-mix -5ml qarışdırıcı ucluqları, qəhvəyi rəng 4:1 -10 ədəd Təlimat vərəqi - 1ədəd



MILKBITE

Dişlərin ölçüsünün götürülməsi üçün polivinil silikon əsaslı material. Yüngül həcmnin hesabına material dişləmədə ciddi müqavimət göstərmir. Milkbite - in dişin üzərinə sıxılma asanlığı və sonra yaranan möhkəmlik istifadəni asanlaşdırır. Materialın diş aralarına axması halı baş vermir və onun dişin üzərindən çıxarılması olduqca asanlaşır. Rahat işləmə və qısa quruma vaxtı (təqribən 50san). Sınmaya qarşı stabilliyə malik olan Milkbite kəsilmə və yonulmaya məruz qala bilər. Son möhkəmliyi təqribən 90A-dır.

Rənglər: krem ağ 1:1

Qablaşdırma: əsas pasta + katalizator - 2x50ml qarışdırma ucluğu, bənövşəyi rəngdə - 12ədəd kontur ucluqları - 12ədəd



TEMPOLINK SINGLE

Evginolsuz, polikarboksilat (1:1) əsaslı müvəqqəti sement materialı. O, tək dişlərin, körpü və protezlərin, inlay və onlayların, eləcə də, zirkon əsaslı işlərin yapışdırılması üçün istifadə olunur. Tempolink single kimyəvi bərkidən sementdir. Hidrofil xüsusiyyətlərinin hesabına optimal yapışmaya malikdir. Heç bir boşluq yaranmadan proterlərin adgeziyasını təmin edir.

Rəng: təbii opak

Qablaşdırma: katric mini-mix - 5ml

qarışdırıcı ucluqlar, qəhvəyi rəngdə 1:1 - 8 ədəd

təlimat vərəqi - 1 ədəd



TEMPOLINK CLEAR

İkili qurumaya malik şəffaf, müvəqqəti fiksasiya sementidir (4:1). Yapışma zamanı fiksasiya təbəqəsi yarandığına görə konstruksiyanın çıxarılması asanlaşır. Tempolink clear adi sementlərlə müqayisədə daha az çıxarılma gücünə malikdir. Şüa ilə bərkiməsi Tempolink clear – i vinirlərin, eləcə də frontal hissədə körpü və karonkaların yapışdırılması üçün ideal edir. Özündə evginol daşımır və bütün növ daimi sementlər ilə uyğunluq təşkil edir. O antibakterial olub, neytral dad və iyə malikdir.

Rəng: şəffaf

Qablaşdırma: katric mini-mix - 5ml

qarışdırma ucluğu, qəhvəyi rəngdə 4:1 - 8 ədəd

təlimat vərəqi - 1 ədəd



Tempofit duomix


Bis-akirik kompozit 5:1, öz-özünə bərkidən, qısa və uzun müddətli müvəqqəti istifadə üçün nəzərdə tutulub. Təzyiqə və aşınmaya davamlı, normal formalaşma, yüksək oklüzal dəqiqlik. Xüsusilə əllə qarışdırma üçün uyğundur, əlavə dispenser cihazı tələb edilmir. Dəqiq doza, heç bir material itgisinə yol vermədən hazırlanma. Qarışdırıcı tapancanın tipi önəmli deyil. Rəngi: A2, A3, A3.5



DETAX

Liqaturasız Carriere Breketləri

Ortodontiya haqqındakı düşüncələrinizi dəyişəcək breket sistemi

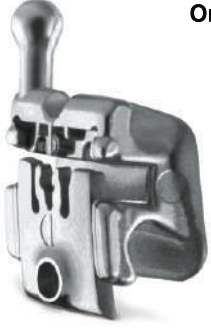

Kliniki performans və pasiyent məmnunluğunda yeni mərhələ

Liqaturasız Carriere Breketləri hazırda ən öndə gedən liqaturasız breketlər siyahısındadır. O xüsusi dizaynı sayəsində çox rahat tətbiq olunur, belə ki breketlə məftil birləşdirərkən zəif müqavimət və güc tələb olunur.

Üstünlükləri:

- **Breketin üz hissəsində İkiqat-Qapanma Sıxacları**
Qalpaq kəsici/okklüzial kənarlara açılır və bu da qalpağı qapalı vəziyyətdə saxlayır. (məs, çeynəmə vəziyyətində)
- **Qapanma Mexanizminin Dodağa Toxunan Hissəsi hamardır.**

Konturlanmış kənarlar və hamar səth pasiyent rahatlığını təmin edir.

• Rahat Qapanma Mexanizmi

Məftil aləti və açma aləti ilə açılır və barmaqla rahat şəkildə qapanır.

• 3, 4 və 5-ci dişlərdə qarmaqlar

Maksimal dəyişkənlik üçün

• Dönə bilmə xüsusiyyəti/Mürəkkəb Kontur

Maksimal dəqiqlik, nəzarət və dəqiq fiksasiya.

• Əyilmiş Kənarlar

breketin əsas hissəsinin ortası və kənarları asan sürüşmə mexanizmini gücləndirmək üçün yumru şəkildə salınıb.

• Bənd Qanadları

Zəncir rezinləri və ya adi liqasiya üçün (ehtiyac olduqda).

Elite Opti- MIM Mini-Twin Breketləri



Elite Opti- MIM Mini-Twin Breketləri dişin formasına uyğun dizaynı sayəsində müalicə prosesində yüksək dərəcədə güc və nəzarəti təmin edir. Tamamilə proqramlaşdırılmış hər bir breket mürəkkəb konturlu əsası sayəsində dişə asanlıqla oturur. Bütün breketlər xüsusilə nikelə qarşı həssas olan pasiyentlər üçün Nickel-Lite paslanmayan polad (kobalt xrom qatışığı) materialdan hazırlanıb.

Elite Opti-MIM® Mini-Twin® Breketlərinin əsas xüsusiyyətləri aşağıdakılardır:

- **Bir hissəli davamlı konstruksiya:** Breketin kənarları onun dişə maksimal sürətdə oturmasını təmin edir.

- **Rənglərlə kodlaşdırılma:** breketləri asanlıqla müəyyən etməyə imkan verir.

- **Mərkəzdən keçən şaquli xətt** breketi dişin kliniki tacına uyğun nizamlamağa yardım edir.

- **Düzgün fiksasiya:** distal bənd qanadları distal dişlərin, mesial bənd qanadları isə mesial dişlərin anatomiyasına paraleldir.

- **Əziyyətsiz məftil dəyişiklikləri:** əyilmiş kənarlar məftilləri asanlıqla yerləşdirməyə və çıxarmağa yardım edir.

- **Hər bir ELITE Opti-MIM Breketi** və ortodontik trubkası dərin oyulmuş səthi sayəsində dişə möhkəm yapışır.

Maestro Yastı Breket Sistemi



Maestro Yastı Breket Sistemi özündə klassik ortodontik dizaynla müasir texnika və istehsalı birləşdirir. Nəticədə ortaya forma və funksiya cəhətdən müasir olan və metal estetikasında yüksək nailiyyət qazanan, eyni zamanda pasiyent rahatlığını təmin edən breket sistemi meydana çıxır.

Maestro Breketlərinin üstünlükləri bunlardır:

- Maksimum yastı olması okklüzial maneələri azaldır.

- Hamar səthi pasiyent rahatlığını təmin edir.

- Konturlanmış mezial-distal kəsik kənarları sürünməni azaldır.

- Optimal mezial-distal məsafə super fırlanmanı təmin edir.

- Romboid şəkilli bu breketlər dişin kənarlarına uyğundur.

Delta Force Breket Sistemi



Delta Force Breketlərinin əsas özəllikləri bunlardır:

- Kənarları hamar diyircəkli qarmaq elastik yerləşməni təmin edir.

- Mərkəzdəki köməkçi xətt breketin düzgün fiksasiyası üçündür.

- Tek gingival liqatura dirəyi məftilin sıxılmasını artırır.

- Mərkəzi dirək zəif sürünmə mexanizmi üçün nəzərdə tutulub.

- Genişləndirilmiş mesial və distal dirəklər liqatura bağlarını saxlamaq üçündür.

- Mikro-oyulmuş altlıq möhkəm yapışmanı təmin edir.

- Kəsiyin (slot) kənarları əyridir və bu da məftili asanlıqla yerləşdirməyə imkan verir.

- Üçqat okklüzial bənd qanadları breketin maksimal fırlana bilməsi üçündür.

- Oral gigiyena və pasiyent rahatlığını təmin etmək üçün breket yastı formada hazırlanıb.

- Nikelə qarşı həssas pasiyentlər üçün Nickel-Lite Materialdan hazırlanıb.

Elite Mini-Twin and Elite Medium-Twin Breketləri

Həm Elite Mini-Twin, həm də Elite Medium-Twin Breketləri aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdirlər:

- Maksimal yapışmanı təmin etmək üçün mikro oyulmuş altlıq
- Diş formasına uyğun dizayn
- Özlüyündən fırlana bilən (torque-in-base), mürəkkəb dizayn
- Rəng kodlaşdırılması və daimi tanınma işarətləri
- 018 və 022 kəsik (slot) ölçüləri

- Bütün köpek dişləri və premolyar dişlərdə diyrəkli qarmaqlar; yuxarı premolyar qarmaqlar mezial-gingival, qalan digər qarmaqlar isə distal-gingivaldır.

Elite Mini-Twin Breketləri

- Standart breketlərdən 30% kiçikdir

Elite Medium-Twin Breketləri

- Elite Mini-Twin Breketlərinə nisbətən 15% böyükdür.



Coralex Breketləri

- Effektiv diş yerdəyişməsi üçün ikiməqsədli breket kəsiyi
- Sıfır dönmə və fırlanma
- 018 və 022 şaquli kəsik
- Basitləşdirilmiş sistem
- Mükəmməl yapışma üçün 80 ölçü şəbəkəli altlıq



Tip-Edge RX-1 Breketləri

Tip-Edge RX-1 Breketləri aşağıdakı xüsusiyyətlərə malikdir:

- Hər bir breketdə bərkitmə, fırlanma və girinti-çıxıntı
- Yalnız düzbucaqlı məftillərlə istifadə etmək məsləhət görülür.
- Köməkçi yaylar üçün şaquli kəsik
- Yerləşdirmə qarmaqları
- Mükəmməl yapışma üçün 80 ölçü şəbəkəli altlıq
- 022 kəsik ölçüsü

Neolucent Breket Sistemi

Görünməz, həmçinin ləkəyə davamlı breketlər

- Hamar səthli yastı breket
- Pasiyentinizin xəyalındakı komforta uyğun dizayn
- Breket romb şəkilli forması sayəsində asan yerləşdirilir.
- Combo-LOK Altlığı güclü yapışmanı təmin edir.
- Sınmaya davamlı
- Mükəmməl bənd qanadları sayəsində asan liqasiya



Illusion Plus Keramik Breket Sistemi

- Tamamilə şəffaf olması sayəsində "təbii görünüş" bəxş edir.
- Ən saf polikristallın, 99% alüminium, sınmaya davamlı
- Mürəkkəb konturlu özlüyündən fırlana bilən dizayn, dəqiq oturma, fırlanma və içəri/çölə hərəkət
- Köməkçi qarmaqlar pasiyent komfortunu artırır.
- Mexaniki "göyərçin quyruğu" kəsiyi



Envision Komposit Breket Sistemi

- Asan yerləşdirmə/çıxarma mexanizmi
- İdeal fiksasiya üçün anatomik konturlanmış altlıq
- Mexaniki "göyərçin quyruğu" kəsiyi / məsaməli səth
- Pasiyent komfortu üçün yastı dizayn
- Dəqiq fiksasiya, fırlanma və içəri/çölə hərəkət



Delta Force Keramik Breketlər

- Ənənəvi breketlərlə müqayisədə daha az sürtünmə üçün patentləşdirilmiş dizayn
- Xalis Polikristallın, 99% Alüminium, sınmaya davamlı material
- Optimal yapışma üçün mexaniki "göyərçin quyruğu" kəsik
- Konturlanmış səth pasiyent komfortunu artırır.
- Dual-okklüzial bənd qanadları



Mini-Alexander Breketləri

- Maksimal pasiyent komfortu
- Ənənəvi breketlərlə müqayisədə 20% kiçikdir və məftilə güc tətbiq etmək üçün breketin daxili daha enlidir.
- Yuxarı 1, 2, 3 və aşağı 1, 2, 3-cü breketlər identifikasiya və yerləşdirməni asanlaşdırmaq üçün diş formasına uyğun dizayn olunub.
- Rahat fırlanma üçün kənar qanadlar asanlıqla aktiv edilə bilər.
- Geniş qanadaltı hissələr asan liqasiyanı təmin edir.
- 018 kəsik ölçüsü
- Mükəmməl yapışma üçün 80 ölçü şəbəkəli altlıq



Bio-Kinetix Termal Aktivləşən Nitən Məftil

İstiliklə aktivləşən Nitən Məftil xüsusilə davamlı performans və zəif qüvvə ilə diş dartmaq üçün nəzərdə tutulub, Bio-Kinetix Termal Aktivləşən Nitən Məftil inanılmaz elastikliyə sahibdir və maksimal termal performans nümayiş etdirir. Məftil otaq temperaturunda elastik olduğu üçün asan bağlanır.

Termal Aktivləşən Bio-Kinetix Məftilindən istifadə etməyin üstünlükləri:

- Formasını mükəmməl saxlayır.
- Temperatur keçirmə dərəcəsi = 26.7° - 32.2°C
- Optimal və davamlı performans

- Otaq temperaturunda asan liqasiya
- Son dərəcə elastiklik
- Termal Aktivləşən Bio-Kinetix Plus məftilinə nisbətən daha az güc tətbiq edir.
- Əhəmiyyətli bərkitməyə ehtiyac olduqda ideal seçimdir.
- Soyuğa qarşı çox həssas olduğu üçün pasiyentdəki diskomfortu azaldır.
- Zəif qüvvə daha çox pasiyent komfortuna təminat verir və hələ müalicənin erkən mərhələsində fırlanmanı nizamlamağa yardım edir.




Bio-Kinetix Plus Termal Aktivləşən Nitən Məftil

Bio-Kinetix Plus Məftili zəif bərkitmədən möhkəm bərkitməyə kimi müalicənin ilkin və orta mərhələləri üçün idealdir. Bu məftil çox asan bağlandığına görə onu əsasən müalicənin ilkin mərhələsində istifadə etmək məsləhət görülür. Məftil yerləşdirildəndən sonra pasiyentin ağızındakı istiliyə reaksiya verir və öz ilkin formasına qayıdıqca yüngül, davamlı qüvvə tətbiq edir.

Yüksək keyfiyyətli nikel titandan hazırlanmış Bio-Kinetix Plus Məftili digər məftillərlə müqayisədə daha çox elastikdir və deformasiyaya qarşı daha çox davamlıdır.

Bio-Kinetix Plus Məftilinin xüsusiyyətləri:

- Temperatur keçirmə dərəcəsi = 18.3° - 23.9°C
- Formasını mükəmməl saxladığına və super elastik olduğuna görə dişin arzuolunan yerdəyişməsinə səbəb olur.
- Əla forma xüsusiyyətlərinə malikdir və elastikdir.
- Məftil normal otaq temperaturunda termal aktivləşir və bu xüsusiyyəti sayəsində çox asan liqasiya olunur.
- Asan liqasiya üçün soyuğa qarşı həssasdır.
- Ucları hamar olduğundan sürtünməni minimuma endirir.

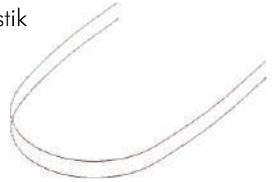

ANCOR PRO Müvəqqəti Ortodontik Fiksasiya Sistemi

Artıq müalicəni effektivləşdirmək və vaxtı minimuma endirmək sizin əlinizdədir. Əgər əvvəllər bəzi bölgələrdə yorucu prosedurlar və ya xaricdən tətbiq olunan sistemlər olmadan fiksasiya mümkün deyildisə, artıq Ortho Organizers firmasının Ancor Pro Müvəqqəti Ortodontik Fiksasiya Sistemi ilə bu mümkündür.

Son dərəcə çoxtərəfli, sadə və istifadədə asan dizayn

Diş yerdəyişməsinə daha çox nəzarət

- Daha yüksək pasiyent komfortu

- Pasiyentdən daha az asılılıq
- Vintlər özlüyündən yivli olduğu üçün asan yerləşir və çıxarılır.
- Vintlər çoxfunksiyalı başlığı sayəsində çoxtərəfli və maksimal performans göstərir.
- Vintlər 1.6mm diametr və üç geniş yayılmış uzunluqda - 6mm, 8mm, 10mm mövcuddur.
- 5 qat titandan hazırlandığı üçün maksimal gücə və əla performansla malikdir.



Ancor Pro Dəsti

Dəstə daxildir:

- 12 Ancor pro Vintləri: 6, 8, 10mm olmaqla hər ölçüdən 4 ədəd
- 2 vintaqan: 1 uzun, 1 qısa
- 1 ucluqla istifadə olunan açar
- Çarxşəkilli açar
- 1 vintaqan
- 1 drel
- 12 Rentgenlə istiqamət göstərən alət



Carriere Distalayzer (dişləri kənarlara dartan alət)

- Üst çənədəki ilk molyarları fırlatmaq və düzləşdirməklə arxa dişlərdəki okklüziyanı I Sinif İdeal Okklüziyaya çevirməklə bərabər köpək dişlərdən premolyar dişlərə kimi olan arxa hissəni kənara dartaraq mükəmməl okklüziyaya səbəb olur.
- Eyni zamanda molyar dişlərin kənarlara dartılması üçün yüngül, stabil qüvvə tətbiq edir.
- Köpək dişlərdən molyara kimi hər bir arxa seqmenti ayrı bir hissə kimi sərbəst şəkildə dartır.
- Müalicənin əvvəlində, digər heç bir alətin ağızda qüvvə tətbiq etmədiyi zamanda istifadə olunur və molyar və premolyar dişləri təxminən 3mm-dən 6 mm-ə kimi dartmağa imkan verir.



Safety Boyun Altlığı

Bu modullar baş geyimindən sonra meydana gələ biləcək əyilmə riskini azaldır. Açıldıqdan sonra yığmaq asandır. Paslanmayan poladdan olan həlqə yayı həkimə məftili hansı deşiyə salmağından asılı olaraq xüsusi qüvvə tətbiq etməyə imkan verir.



Çənə Qalpağı

Möhkəm rezindən hazırlandığı üçün pasiyentin çənəsini və yanağını sıxmır.



Riofoto Rodium Örtüklü İntra-Oral Güzgülər

Rodiumla, ağ-gümüşü rəngli metallə örtülmüş güzgülər daha aydın, parlaq görüntülər bəxş edir ki bu da yüksək keyfiyyətli dental şəkillər çəkməyə imkan verir.

Maksimal Əks etdirmə

- Rodium örtüklü güzgülərlə aydın, parlaq şəkillər
- Xrom güzgülərdən 10% artıq aydın əks etdirmə
- Metal güzgülərdən 20% artıq aydın əks etdirmə



Twin Force Okklüziyanı düzəldən sistem

Twin Force II və II Sinif dental okklüziyalı düzəldən istifadə olunan mükəmməl alətdir. Hətta ən sözə baxmayan xəstələriniz belə rahatlıqla qısa zaman içərisində ideal okklüziyaya sahib olacaq.

- İstifadədə asan
- Pasiyentdən xüsusi heç nə tələb olunmur.
- Laboratoriyada əlavə alət hazırlamağa ehtiyac qalmır.
- Pasiyent rahatlığı
- Dişi dartmağa ehtiyac olduqda da, olmadıqda da istifadə oluna bilər.



Universal çarx dispenseri

Çarx şəklində olan məhsullarınızı səliqəli saxlayın. Dispenseri zəncir rezinləri, toxuma qoruyucu, sap, həlqə yayları və s. saxlamaq üçün də əlverişlidir.



Mini-O-Liqatura Bənd Dəsti

Kiçik dəst (1800 bənd)

18 individual rəng/hərəsində 10 çubuq

- 400-700

Boş • 400-5BX

İri dəst (2600 bənd)

26 individual rəng/hərəsində 10 çubuq

- 400-700XL

Boş • 400-5BXXL



Dar Ucluqlu iynə saxlayan

Dar ucluqlu iynə saxlayanın ucları dişlidir. Təhlükəsizlik qapanması əlcəyin dilçəyə ilişməsinə mane olur, ikiqat yay isə sürətli açma və bağlamayı təmin edir. Liqatura məftili və rezin yerləşdirmək üçün münasibdir.



Nitan Bağlı Həlqə Yayları

Bu yaylar super-elastik nikel titanından hazırlanıb. Nitan həlqə yayları eksklüziv perpendikulyar həlqə dizaynında hazırlandığından onları bağlamaq və açmaq asandır.

200 qram Qüvvə

- 010 x 030 - 9mm bağlayıcı həlqə (bağlamada 6 ədəd)
- 010 x 030 - 12mm bağlayıcı həlqə (bağlamada 6 ədəd)

300 qram Qüvvə

- 010 x 030 - 12mm bağlayıcı yay (bağlamada 4 ədəd)
- 010 x 030 - 14 mm bağlayıcı yay (bağlamada 4 ədəd)
- 010 x 030 - 16 mm bağlayıcı yay (bağlamada 4 ədəd)
- 010 x 030 - 18 mm bağlayıcı yay (bağlamada 4 ədəd)



Fırlanan başlıqlı Breket hündürlüyü ölçən alət

Möhkəm, paslanmayan poladdan hazırlanmış alət dörd ölçüdə breket hündürlüyü üçün istifadə olunur; okklüzial səthdən 3.5, 4.0, 4.5 və 5.0mm. Hər iki sonluğundakı qarmaqlar sayəsində 45° əyilə bildiyi üçün ön dişlər, köpək dişləri və premolyar dişlərdə asanlıqla istifadə olunur. 018 və 022 kəsikli breketlərlə istifadə üçündür.



Breket hündürlüyünü ölçən alət

Dişlərin kəsici tərəfindən breketin hündürlüyünü dəqiqliklə ölçür. 3.5, 4.0, 4.5 və 5.0 mm işarələri var.



Easy Access pinsetləri

İncə işlənmiş ucları olan pinset trubkanın breket kəsiyində möhkəm yerləşməsinə təmin edir.



Pasiyent dəsti

Bir sıra parlaq rənglərdə mümkündür, bundan başqa sifarişlə qutunun üzərində adınızı və kontaktlarınızı yazdırı bilərsiniz. Ortho Organizers' ortodontik pasiyent dəstinə daxildir:

- Ortodontik diş fırçası
- Səyahət üçün diş fırçası
- Dişarası istifadə üçün fırça
- Nanəli mum
- Diş sapı
- Nanə ətirli sap
- Dental güzgü



Dözümlü, yüksək keyfiyyətli plastik kütlədən hazırlanmış bu retener qabları yeni rahat dizaynı və asan bağlanması ilə fərqlənir. Adi və parlaq rənglərdə mövcuddur.



Ortodontik rahatlaşdırıcı mum və dispenser

Ortodontik vasitə yumşaq toxumanı qıcıqlandıranda pasiyentin köməyinə məhz bu mumlar çatır. İstifadəsi çox asandır və dərhal təsir göstərir. Adi, ətirli və ya nanəli olur.



Ölçü qaşıqları

Yuxarı və aşağı çənə üçün 6 müxtəlif ölçüdə olan bu qaşıqlar həm uşaqlarda, həm də böyüklərdə istifadə oluna bilər. Ölçülər rənglərlə kodlaşdırıldığından istənilən ölçünü müəyyən etmək asan olur.



Şəkil çəkmək üçün yüngül qutu

Daşına bilən bu qutu stolun üstünə qoyula və ya divardan asıla bilər. Metal sancaqlar filmi və kalka kağızını saxlayır. İstifadə zamanı istilik vermir.




Breketli diş modelləri

ORTHO orginizer-in təqdim etdiyi təbii görünüşlü diş modelləri breketlərin mükəmməl görüntüsünü təmin edir.



	DistalEndCutter (SafetyHold) Distal Uc kəsici(Safety Hold) 0.12 dən "021 x 025"-ə qədər olan bütün növ məftilləri asanlıqla kəsir.Safety Hold(təhlükəsizlik tutumu)-məftili kəsdikdən sonra kəsilmiş məftil parçasını saxlamaq xüsusiyyəti.	204-101
	DistalEndCutter(SafetyHold) w/LongHandle Distal uc kesici uzun tutacaqlı(Safety Hold) Tutacaqları daha uzundur. Eynilə 0.12 dən "021 x 025"-ə qədər olan bütün növ məftilləri asanlıqla kəsir. Uzun tutacağının olması xüsusilə 7 ci diş(də trupka olarkən)ə daha rahat uzanmaq imkanı yaradır.	204-101XL
	Micro Mini Pin&LigatureCutter Mikro mini pin&liqatura kəsən Bu modeldəki incə uclar daha çətin bölgələrdə kəsməyə imkan verir.Bu cutter (kəsici) soft-wire pinlərini, elastikləri və 0.12-ə qədər olan liqaturaları kəsmək üçündür. İncə uclu olması sıx(kip) bağlanmış liqaturanı belə rahat kəsmək imkanı yaradır.	204-107
	Slim Weingart Pliers İncəWeingart. Bu alət məftili tutub trubkaya ya da kalçoya(band) keçirmək üçündür.Dişli ucları ağızda məftili kip tutur. Konus şəklindəki dimdik hissəsi də ağızda arxaya rahat keçməyə imkan verir.	204-202
	Posterior Band Removing Pliers PosteriorBand (arxa kalço çıxarmaq üçün olan alet)Posteriordakı kalçoları təhlükəsiz və tez çıxardır. Xəstənin rahatlığı üçün Metal ucu kalçonun altına keçir (yəni dişətinə tərəf olan hissəsinin) digər plastik ucu dişin çeynəmə səthinə tutunur və onu qoruyur.	204-207
	Debonding Pliers Söküm aləti Metal, keramika və plastik breketləri sökmək və dişin üstündə qalan kompozit(adhesive) artığını temizlemek üçündür.	204-219
	Bird Beak Pliers Quşdimdiyi aleti Bütün növ məftillərdə büküm etmək üçündür. Yumru və piramid dimdiği 0.30 a qədər olan bütün ölçüdəki məftilləri əyə bilər.	204-304

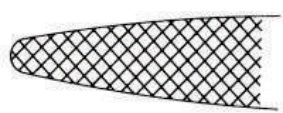

MosquitoForceps
Moskito

Elastik(rezin) ligaturaları yerləştirmək üçündür

Narrow Tip
200-128



ElasticSeparatingPliers
Elastik separasyon aləti

Bu alət kalço yerləştirməmişdən əvvəl kontaktları çox kip olan, kalço keçməyən dişləri azca aralamaq üçün istifadə olunan separasyon rezini taxmaq üçündür.

200-407



ElasticRemover
Elastik çıxarıcı

İki ucludur. Elastik(rezin) ligaturanı çıxartmaq üçündür

200-109



Ligature Remover Director

Bir ucu liqaturanı gizlətmək üçün, digər ucu gizlədilmiş liqaturanın ucunu çıxarmaq üçün

201-503



Distal Bender
Distal eyici

Hər həkim üçün vacibdir. Uzun tutacağı və bucaqlı trupkası var. Meftilin ucuna keçirilir və rahatlıqla əyilir. Cinchback eləmək üçündür. Cinchback-Məftilin ucunun(trupkadan və ya kalçodan sonrakı hissəsini) əyilməsi.

200-130



Bracket Placer/Slot Aligner

Bir ucu breketi tutmaq digər ucu da dişə qoyduqdan sonra dişə uyğun yerləştirmək və dişə sıxmaq üçündür

200-322



Band Biter
Kalço dişlədicisi

Kalçonu yerləştirəndən sonra tam otursun deyə pasient bunu dişləyir. Avtoklav oluna bilər.

200-308



Heavy-Duty Band Pusher
Band itələyici

Kalçoları yerləştirmək diş ətinə doğru itələmək üçündür.

200-420

KOMPOZİT ƏSASLI MATERIALLAR

GC G-Bond

Birkomponentli özütürşulu işıqla bərkiyən adheziv sistemi

XÜSUSİYYƏT VƏ ÜSTÜNLÜKLƏR:

- Emal və dentinin az aşılması dentin kanallarını bağlı saxlayır ki, bu da dişdə həssaslıq yaranma riskini minimuma endirir;
- İki müxtəlif funksiyalı monomerin olması dentinə və emala kimyəvi yapışmanı gücləndirir;
- Monomerin eyni vaxtda deminerallaşması və infiltrasiya olması hibrit qatın daha effektiv qapanmasını təmin edir ki, bu da ion axıntısı riskini aşağı salır;
- Sadələşdirilmiş istifadə ilə birkomponentli sistem vaxta qənaət edir - işləmə vaxtını 30 saniyəyə endirir;

- Möhkəm və davamlı yapışma dentinin nəmlik dərəcəsindən o qədər də asılı deyil;
- Tərkibində HEMA (Hidroksietil Metakrilat) yoxdur, eləcədə allergik reaksiya yaratmır;
- Stabil tərkib və otaq temperaturunda saxlama imkanı;



KOMPOZİT MATERIALLAR

GC G-Cem (Automix)

Daimi fiksasiya üçün özlüyündən yapışqan sement

XÜSUSİYYƏT VƏ ÜSTÜNLÜKLƏR:

- Restavrasiya maddələrinə, eləcə də zirkona mükəmməl yapışma;
- Emala həm kimyəvi, həm də işıqla təsir zamanı əla yapışma;
- İşə başlamazdan əvvəl dişlərin təmizlənməsinə ehtiyac yoxdur;
- Qutunun içərisində olan xüsusi ucluqlar materialın bilavasitə kanal köklərinə vurulmasını təmin edir;
- Rəngin yüksək stabilliyi - qurumadan sonra rəng dəyişmir;
- Xətti genişlənmənin minimum səviyyədə olması;
- Rəqib məhsullarla müqayisədə yüksək dərəcəli ftor ayrılması.

İSTİFADƏ SAHƏSİ:

- Keramik və kompozit taclar, eləcədə körpü və protezlərin yapışdırılması;
- Metal və metal keramik taclar, eləcədə plomb;
- Böyük uzunluqda olan körpü protezlərdə;
- Zavod istehsalı olan metal, şüşə ionomer və keramik şiftlərin yapışdırılmasında.



MI Paste Plus

KALSİUM, FOSFAT VƏ FLORİD TƏRKİBLİ DİŞ KREMI

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

- Ortodontik müalicə zamanı, xüsusilə ağ ləkə əmələ gələn yerlərdə
- Dişlərin ağardılması və təmizlənməsindən sonra yaranan həssaslığı aradan qaldırmaq üçün
- Ağız boşluğunda turşu nisbəti çox olan xəstələrdə
- Hamilə qadınlar üçün
- Tərkibi kalsium + fosfat + florid



Tooth Mousse

SU ƏSASLI, ŞƏKƏRSİZ DENTAL KREM

ÜSTÜNLÜKLƏRİ:

- Dişlərdə kariyesin yaranmasının qarşısını almaq üçün
- Ortodontik müalicə zamanı
- Dişlərin ağardılması və təmizlənməsindən sonra yaranan həssaslığı aradan qaldırmaq üçün
- Hamilə qadınlar və 6 yaşa qədər uşaqlar üçün
- Tərkibi kalsium + fosfat



GC RELINE

SƏRT PROTEZ ALTLIĞI

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Xəstənin yanında bilavasitə və sadə yenidən qurulma
- Tərkibində metilmetakrilat olmadığı üçün ağız boşluğunu qıcıqlandırmır
- Quruma zamanı minimal istiliyin ayrılması, xoş iy və dada malik olması
- Son emal qarışdırılmaya başlayandan 5 dəqiqə 30 saniyə sonra yerinə yetirilə bilər

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR

GC RELINE CHAIRSIDE diş protezi sərhədlərinin möhkəm diş protezi tənləşdirmələri (altlıqları, ara qatları, örtükləri, üzlemələri) və genişlənməsi üçün istifadə edilən akrildir.

Onun mayesi diş əti toxumasının xoşagəlməz ətrini və qıcıqlanmasını azaldır.



GC Reline Soft

YUMŞAQ SİLİKON ALTLIQ ÜÇÜN MATERIAL

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Zaman keçdikcə öz elastikliyini itirməməsi ona çeynəmə yükünü yumşaltmağa imkan yaradır.
- Silikon quruma zamanı özündən istilik ayırmır və qoxusuzdur.
- Təzyiq altında əla axıcılıq xüsusiyyətinə malikdir.



GC Gradia Direct X

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Mikrofil hibrit kompozit
- Mükəmməl estetika
- Kompozitin oturma dərəcəsinin minimum olması
- "Buqələmun effekti" kompozitə tez bir zamanda rəngini dəyişmək imkanı verir.

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR

Gradia Direct I və II növ oyunqların birbaşa bərpası üçündür.



GC Gradia Direct Flo

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Yapışqan olmaması ona dişin divarlarına yaxşı adaptasiya olmağa imkan verir.
- İşıqla bərkiməsi və rentgen şüalarını əks etdirməməsi diaqnostikası sadələşdirir.
- Şprisin xüsusi dizaynı kompozitlə işi asanlaşdırır

İSTİFADƏSİNƏ GÖSTƏRİŞLƏR

- 1) Çox kiçik boşluqların bərpası
- 2) Kök səthi çürüklərinin restavrasiyası zamanı
- 3) Keçici dişlərin restavrasiyasında
- 4) Tunel şəkilli boşluqların restavrasiyasında
- 5) Çox həssas sahələri örtmək üçün
- 6) Örtücü olaraq
- 7) Kompozit restavrasiyasına əlavə olaraq



GC FUJI TEMP LT

GC Fuji Temp LT bərkidikdən sonra asanlıqla təmizlənən, güclü yapışdırma xüsusiyyətinə malik müvəqqəti şüşə ionomer sementdir.

Bütün növ keramik, rezin, metal əsaslı qapaqların, körpülərin habelə implant abatmentlərinin müvəqqəti sementlənməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.



COE-PAK

Cərrahi örtük və Peridental sarğı

COE-PAK™ AUTOMIX NDS istifadəsi

rahat, xoşagəlməz qoxusu olmayan və yandırıcı təsir bağışlamayan evginolsuz xüsusi cərrahi bintdir. Cərrahiyyə olunmuş mövqələrin etibarlı qorunmasını təklif edir. Təmizliyi və sağaldıcı olmağı ilə seçilir. Hamar Olmağı Coe-Paka yaranı qorumaq üçün dişlərə və diş ətinə sıx uyğunlaşmağa imkan verir. Coe-PAK-ın NDS versiyası mexaniki qarışdırmanı aradan qaldırmış və dərhal yerləşdirmək üçün ardıcıl qarışdırıcı mexanizmlə təmin olunmuşdur.



GC TEMPRON

Öz-özünə bərkiyən akril
Qabarcıqsız (parasız) hamar səth.



GC Fuji ORTHO LC

**İŞIQLA BƏRKİYƏN REZİN
ƏLAVƏLİ ŞÜŞƏ İONOMER
SEMENT**

İstifadəsinə göstərişlər

- 1) Bağlayıcı metal dayaq və bağlar
- 2) Bağlayıcı keramik dayaq
- 3) Bağlayıcı akrilik ləvazimatlar
- 4) Breketlər



GC PATTERN RESIN LS

ÖZ-ÖZÜNƏ BƏRKİYƏN AKRİLİK REZİN

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- Minimal sıxılma
- Dəqiq ölçü və modellərin alınması
- Nazik qatlarda yüksək stabillik
- Qalıqsız əriyib çıxması
- Ölçünün rahat təmizlənməsi
- Yonulmanın asan olması



GC Fuji Plus

**REZİN ƏLAVƏLİ ŞÜŞƏ İONOMER
SEMENT**

ÜSTÜNLÜKLƏRİ

- İşləmə vaxtı və qarışması adi sement qədər asan olsa da mexaniki xüsusiyyətləri kompozit sementlərə uyğundur.
- Kimyəvi adheziv olması nəm mühitdə əlavə yapışdırıcı istifadə etmədən işləməyə şərait yaradır.
- Sement qatının minimal qalınlığa malik olması rahat və dəqiq yapışmanı təmin edir
- Həkim müdaxiləsindən sonra heç bir həssaslıq hiss edilmir.



GC Fuji II

**ŞÜŞƏ İONOMER RESTORATİV
SEMENT**

Üstünlükləri

- 1) Nəmə qarşı dözümlü olması
- 2) Rentgenokontrastdır
- 3) Dentin və emala turşu və bond olmadan xüsusi yapışır
- 4) Hidrofil olması



GC FUJI 1

**ŞÜŞƏ İONOMER YAPIŞDIRICI
SEMENT**

25 illik sənədləşdirilmiş istifadə
GC FUJİ 1-in gündəlik
fiksasiya prosedurlarında tam
təhlükəsiz və effektiv olmasını
sübuta yetirmişdir.

GC FUJİ 1 metal əsaslı
bərpalar üçün fiksasiya
işlərində idealdır.



G-aenial



Restavrasiyalarda diş-plomb birləşmə xəttinin görünməzliyi.
GC sizə G-aenial Anterior və Posterior təqdim edir.

Üstünlükləri;

- Təbii əks etdirmə
- Görünməzlik
- Üstün çalar konsepsiyası
- Asan istifadə
- Yaxşı cilalanma
- Sadələşdirilmiş müşahidə
- Dayanıqlılıq və elastiklik

Təbii əks etdirmə görünməzlik yaradır

Təbii dişin rəngini və işığı əks etdirmək xüsusiyyəti G-aenial ilə çox rahat və sadədir. Eyni zamanda mükəmməl tərkibi və işığı paylama xüsusiyyətinin hesabına sadəcə bir çalarının istifadəsi zamanı belə xameliyon effekti əldə edilir, və nəticədə dişin rəngi ətraf dişlərdən heç fərqlənmir.

Üstün çalar konsepsiyası

Stomatoloji bazarda mövcud bütün restovrasiya materialları heç də həmişə həkimin tələblərini ödəmir. Çox vaxt daha estetik restovrasiyalar əldə etmək rahat və asan olmur. Ancaq indi GC məhsulu olan G-aenial-ın sadəcə bir rəng çalarını istifadə etməklə belə mükəmməl estetik nəticələr əldə edə bilərsiniz. Daha çətin hallarda isə G-aenial-ın təklif etdiyi "Üstün Rəngləmə Sisteminin" köməyi ilə 2 və ya 3 rəng çaları vasitəsilə mükəmməl estetik restovrasiyalar. Bu o deməkdir ki hətta plombu qat-qat qoyma metodu da sadələşdirilib.

Xüsusi rənglər

Baxmayaraq ki bir çox hallarda sadəcə bir rəng çaları ilə mükəmməl estetik nəticələr əldə edilir, bəzən multi-çalar metoduna üstünlük verilə bilər, məsələn daha böyük defektlərdə. G-aenial seçim üçün Special Shade-in 2 tip əlavə çaları təklif edir; bunlardan Inside shade (alt qat) Standart rəngin altına, Outside shade (üst qat) isə Standart rəngin üzərinə yerləşdirilməklə istifadə edilir.


Outside Special Shades – mina təbəqəsini əvəz etmək üçün

Restorativ diş həkimliyində dişin rəngini və minanın təbii translusensliyini pasiyentin yaşına uyğunlaşdırmaq mühümdür. Buna görə də mina rəngləri (enamel shades) bunu nəzərə alaraq seçilmişdir.

Junior Enamel - gənc pasiyentlər üçün

Adult Enamel - yetgin pasiyentlər üçün

Senior Enamel - yaşlı pasiyentlər üçün

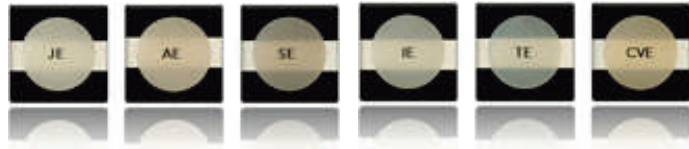

Outside Special Shades – xüsusi vizual effekt yaratmaq üçün


Translucent Enamel- restorasiyaya sanki dərinlik effekti verir.

Incisal Enamel - xüsusilə gənc pasiyentlərdə minanın okluzal və proksimal səthində istifadə edilə bilər.

Cervical Enamel - boyun nahiyyəsinə daha tünd dentin parıltısı verir.

Inside Special Shade- qeyri-şəffaflıq əlavə etmək üçün

Bu opak (qeyri şəffaf) rənglər Standard rənglərin altında istifadə edilir və final rəngə istilik, canlılıq bəxş edir. G-aenial Anterior versiyasında və 3 rəng çalarında mövcuddur.

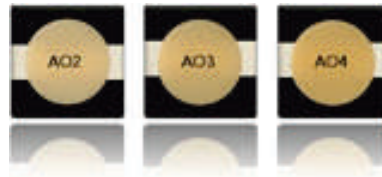

Asan istifadə

Yaxşı cilalana bilmə

Sadələşdirilmiş follow-up (izləmə)

Dayanıqlı və elastik



CERAM • X DUO



Ön və arxa dişlərin bərpası üçün işıqla bərkiyən, radiopak bərpa materialıdır. Nano texnologiya əsasında hazırlanan materialın tərkibində keramik hissəciklərin olması əlavə iş görmədən təbii estetikanı əldə etməyə imkan verir.

Bir şpris ilə iki rəngi işləmə imkanı. Təbii estetikliyi ilə fərqlənən mükəmməl şəkildəmə xüsusiyyətləri. Təbii rəng sistemi ilə anterior və posterior dişlər üçün istənilən rəngi seçmə.

- 7x3 q. (rənglər E1, E2, E3, D1, D2, D3, D4),
- 2 (i-shade) etikətləri,
- 1 mono rəngli şkalası,
- Şəkilli və yazılı istifadə kitabçası, hazırlıq qabı, 50 ədəd ucluq.

ESTHET X.HD Compules

Kapsula formasında dəstə daxildir: 156x0.25 q. Esthet X kapsulu, kapsula üçün tapança, rəng şkalası, Prime and bond NT, 4.5 ml., 50 ədəd ucluq, 40 ədəd parlatma rezini, 1 ədəd, metal mandrel, şəkilli istifadə kitabçası. 31 rəng seçimi CE, ÜE, YE, AE, GE, W, XL, A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B5, C1, C2, C3, C4, C5, D2, D3, q (universal), W O, A2 O, A4 O, B2 O, C1 O, C4 O, D3 O



SPECTRUM

Spectrum həm ön həm də arxa dişlərin restavrasiyası üçün yarım mikronluq hibrit kompozitdir. Kompozitin kapsula və ənənəvi şpris formaları var. Təkmilləşmiş cilalanma davamlı restavrasiyanı təmin edir. Tək komponentli adgesiv sistemlərlə bərabər ideal istifadə. Sadə istifadə, matriks lentləri ilə mükəmməl rəng uyğunluğu və cilalana bilmə. Kremformalı tutarlılığı alətlərə yapışmağa imkan vermir. Bu xüsusiyyəti modeləşdirmə üçün gözəl şərait yaradır.

Dəstə daxildir:

- 6x4.5 qr. refil (A2 A3 A3.5 B1 B2 C2),
- 4.5 ml. Prime and bond NT,
- 3 ml. turşu,
- 25 ədəd ucluq,
- Rəng şkalası



CERAM X MONO

Ön və arxa dişlərin bərpası üçün işıqla bərkiyən restorativ material.

İstifadə xüsusiyyətlərinin təkmilləşdirilməsi, hesabına yeni təkmilləşdirilmiş modeləşmə performansı təklif edir.



Dəstə daxildir.

- 7 şpris - (1x M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7)
- 2 rəng izləmə şkalası, 1 mono rəng almaq üçün orijinal material.
- 1 şəkilli istifadə kitabçası, 1 qab, 50 tətbiq etmə ucluqları

ESTHET X.HD

Uzun ömürlü restavrasiya üçün mükəmməl fiziki xassələri var. İşıqla sərtləşən bütün sinif dişlərin bərpasında istifadə olunan mikro matriks kompozit plomb materialı. Frontal dişlərdə xüsusi estetiklik, dayanıqlıq və güc, təbii rəng seçimi. Kapsula və şpris formasında buraxılır.

Şpris formasında dəstə daxildir:

6x3 Esthet X şpris, prime and bond NT, 4.5ml, 50 ədəd ucluq detrey condeteoner %36.3 ml. və 25 ədəd iynə, şəkilli istifadə kitabçası.



SDR - Smart Dentin Replacement

Posterior restorasiyalarda istifadə oluna bilən, axıcılıq xüsusiyyəti sayəsində boşluğa mükəmməl adaptasiya ilə birlikdə tək parça halında (4 mm-ə qədər) tətbiq olunma imkanı təqdim edən ilk və tək kompozit materialı olub mükəmməl dentin əvəzləyicisidir.

SDR - metakrilat bazalı kompozit və adgezivlərlə birlikdə kimyəvi olaraq uyğundur.

- Əlinizdə olan bondunuzu işlədə bilərsiniz: dəyişdirməyə ehtiyac yoxdur.
- Üst təbəqədə daim işlətdiyiniz kompoziti işlədə bilərsiniz.
- İstifadəsi çox asandır. Araqata ehtiyac yoxdur. Enmə stressinin çox aşağı olması digər oxşar materiallarla müqaisədə tam üstünlük yaradır.



Esthet X-flow

Axıcı mikro-hibrid kompozit

Bu kompozit plomblamada yeni eranın yaranmasına səbəb olmuşdur. X-flow özünün tərkibi ilə digərlərindən irəlilə gedir. Bu kompozitin unikal fiziki tərkibi kompula adlanır. Bu materialı uzun nazik başlığın köməkliliyi ilə dişin bütün dərinliklərinə yeritmək mümkündür. Belə ki, bu kompozit bütün növ kompozitlərlə rəqəblilik edə bilər.



SDR Intro Kit

Boşluğu birdəfəyə doldurmaq üçün kompozit

Dəstə daxildir:

Hər birində 0,25 qr olan 45 kapsula(universal rəng zəlar) 2,5 ml dental adgeziv

- 1 ədəd qarışdırma qabı
- 1 ədəd tapança(kapsul ucluqlar üçün)



SDR 45 COMPULA T PS

Hər birində 0,25 qr olan 45 kapsula(universal rəng çaları) Kapsulaların saxlanması üçün metal qab.



PRIME & BOND

Prime Bond işıqla bərkidilən kompozitlərin dentin və mina qatına yapışdırılması həmçinin metal və keramika üçün universal öz özünə astarlanan dental adgezivdir. Prime&Bond astar və adgezivi bir qabda birləşdirir.



XP BOND

İşıqla bərkidən qətran əsaslı restorasiya materillərinin dentin və mina qatına yapışdırılması üçün düzəldilmişdir. XP bond yüksək yapışma gücü və asand tətbiq olunması ilə yüksək performans nümayiş etdirir.



PRISMA GLOSS

Kompozit və vinirlərin yekun cilalanması üçün düzəldilmişdir. Bu pasta ön və arxa kompozitlərin hamarlanmasını və səthin yüksək parıltısını təmin edəcək.



AQUA CEM

Şüşə ionomer əsaslı fiksasiya edici sementdir. Daimi sementləmə üçün idealdir. Metal keramika və körpülərin fiksasiyasında, ortodontik işlərin sementlənməsində istifadə olunur.

Distillə olunmuş su ilə qarışdırılır. Su ilə qarışma və uzun işləmə müddəti. Dəstə daxildir: 30qr. Toz + su qabı.



PALODENT PLUS MATRIX SYSTEM

II sinif qüsurları bərpa etmək üçündür. Palodent Plus ilə dəqiq kontakt, sıx marginal kənar (dişəti kənarı) əldə etmək mümkündür. Həmçinin asan daxil edilib, xaric edilə bilər və çıxıntılar (plomb artıqları) minimum olur və tamamlama (cılalama) işləri asanlaşır.



ASH ROBBER DAM KIT

Muasir stomatologiyada Robber Dam bütün cərrahiyyədə gərəkdir. Onun gündəlik istifadəsi bir çox dental mualicələrdə uğur qazanmanıza imkan yaradacaq. Robber Dam iş zamanı ağız boşluğunda nəmliyə tamamilə nəzarət etmək üçün əsasən də çuxurların hazırlanması və restavrasiya zamanı işlənən yerin tam quru saxlanması üçün, daha yaxşı görüntü əldə etmək üçün, yanaq, dodaq və dil ətrafı mövqelərin qoruması üçün çox zəruridir. Robber Dam başlanğıc dəstinə 5 ədəd qulp sıxac, kəlbətin, 1,93 mm-lik panç, sterilizasiya qabı, plasmas Robber Dam çərcivəsi və ağır yaşıl rəngli Robber Dam materialından və Robber Dam Technique adlı DVD-dən ibarətdir.



DYCAL

Pulponu birbaşa və yaxud bilavasitə qorumaq üçün kalsi hidroksid əsaslı izolyasiya olunmuş iki komponentli materialdır. Həm müalicəvi araqat, həm də müvəqqəti sement kimi istifadə edilir.

Çox yüksək təzyiqə və turşuya davamlıdır.

- 13 gr basis pasta
- 11 gr katalist pasta



ENHANCE FINISHING SYSTEM

Bu dəst ön, arxa və digər mövqelərdə kompazitlərin tamamlanmasında cılama işlərinin görülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Enhance dəsti birdəfəlik istifadə üçün silikon ucluqlardan, çaxkalar və disklərdən həmçinin yekun cılalalama işi üçün Prisma Gloss cılama pastasından ibarətdir.



AH-26

Təkbaşına, və ya qutta perca ilə, titan və gümüş kanal ştiftləri ilə işlədilə bilən kanal plombu. Tərkibinə görə gümüş və gümüş olmayan formaları var. Hazırlanarkən büzüşmə və sovrulma olur.

Dəstə daxildir.:
8qr. toz + 10 qr. maye



AH PLUS


Epoksiamin polimer tərkibli kanal plombu AH-26-nın daha inkişaf etmiş forması.

Dəstə daxildir: 1 tube pasta A,
4ml B, 4 ml



MINI ENDO BLOK

Fayıllar üçün qab

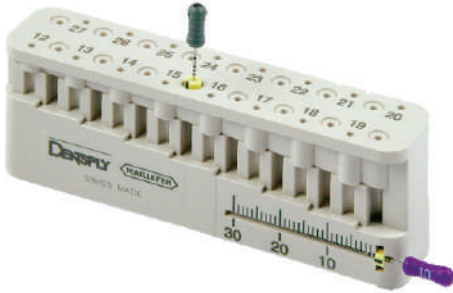


FILE HOLDER

Proteyperlər üçün qab



ENDO BLOK-M

Fayıllar üçün qab

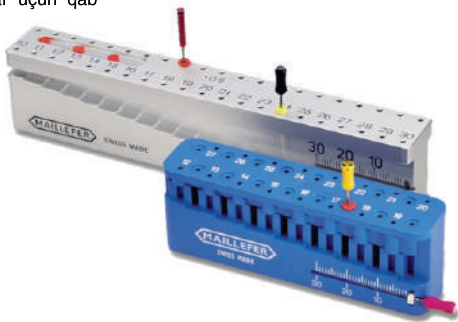

TWIN BLOK

Faylları saxlamaq üçün qab



M-ACCESS K-FILE

Kanalları genişləndirmək üçün əl faylları



NITI FILE

Kanalları genişləndirmək üçün nikel titanium əsaslı əl faylı.
Dəstə 6 ədəd daxildir.



LENTULO

Endomotor üçün fayl.



K-FLEXOFILE

Kanalları genişləndirmək üçün əl faylları



Campules Tips Gun

Kapsulaların tətbiqi üçün tapança.



Propex II Apex Locator

Tam rəngli ekrana malik yeni nəsli Apex Locator Mailleferin Propex II Apex Locatoru faylı izlənməsi üçün yeni nəsli tam rəngli vizual ekranla xarakterizə olunur. O həmçinin ən son multi dalğa texnologiyasına və genişləndirilmiş apikal zoom funksiyasına sahibdir, hansı ki fayl apeksə çatanda aktivləşir və həkimə bir çox kanal tiplərində apeksi rahatlıqla təyin etməyə imkan verir. Propex II apex locatorunun yüklənilən batareya ilə təmin olunması dental əməliyyatlarda rahat işləməyə imkan verir.



X-SMART DUAL

Endomotor və Apeks lakator funksiyalı ikili xüsusiyyəti var. Hər biri ayrı ayrılıqda asanlıqla istifadə oluna bilər.



Endomate TC2

- Naqilsiz işləmə rejimi
- 2.5 dövr etmə ayarı
- Avto geriye fırlanma
- Döviyyəni və fırlanma sürətini tənzimləmək üçün yaddaş funksiyası.
- 90 dəqiqə enerji saxlama qabiliyyəti.


X-SMART PLUS

Endodontiyada ən son xüsusiyyətləri özündə daşıyan, istifadəsi rahat və asan olan mükəmməl endomotor. Monitoru rəngli, quruluşca kompakt və protativdir. Ayaq pedalı olmadan həmçinin batareya ilə idarə olunur. WaveOne ilə işləmə, döviyyəyə nəzarət və davamlı fırlanan instrumentlərlə avtomatik geriye hərəkət rejimləri X-Smart Plusun bazarda ən muasir endomotor olmasına səbəb olur.



Profile

1996-cı ildən mövcud olan Profile alətləri öz qeyri kəsiş "Radial Xətt" profili və U formalı bölməsinin hesabına maksimal təhlükəsizliyi təklif edir.

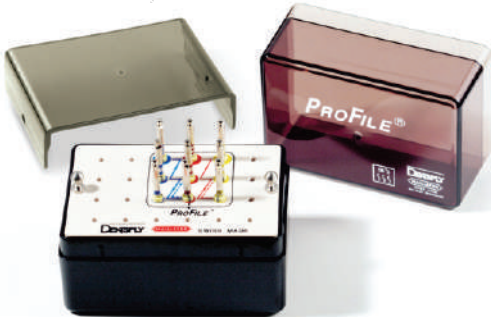

X-SMART EASY

Simsiz, yüngül endomotor olub təhlükəsiz kanal müalicəsini həyata keçirmək üçün kifayət qədər hərəkət sərbəstliyi yaradır və ergonomik dizayn üslubuna malikdir. Yüklənə bilən Li-Ion batareyası dayanmadan 1 saat işləməyə imkan verir. Dərəcəli ucluğunun 6 pozisiyalı hərəkəti malik olması çətin giriləsi zonalarda işləməyi asanlaşdırır.



X-SMART

İstifadəsi asan və rahat endomotor. Stomatologiyada lazımı ehtiyacları qarşılaya bilən sadə endomotor. LCD ekran, sadə idarə etmə paneli.



PATHFILE

Proteyper öncə "xalça yolu"nu yaradan fayl.



PROTAPER

Kanalları genişləndirmək üçün endomotor faylı



WAVE ONE

Kanalları genişləndirmək üçün endomotor faylı



Chirana Cheese Exclusive

Yüksək keyfiyyət və mükəmməl dizaynın harmoniyası



Mükəmməl həll üçün mükəmməl ideya


Cheese Exclusive- həkim və xəstənin tam rahatlığını təmin edəcək, istehlakçının bütün tələblərini nəzərə alaraq, ən yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə etməklə hazırlanmış bir qurğudur.



Straight handpiece 110 D



Turbine TGL 637 Light

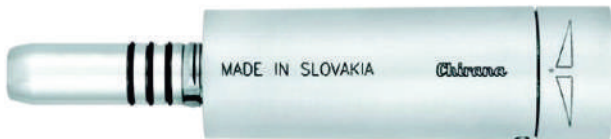

CH 660 - micromotor without light



Turbine TS 655 (little head)



R 420



CH 660 LIGHT - micromotor with light



TGL 637 A



Contra-Angle handpiece 120 D



OZK 93Ti



TGL 637



TG 656



Head 168 D/T




Head 168 D

KOMPRESSOR



KLT6210-N1



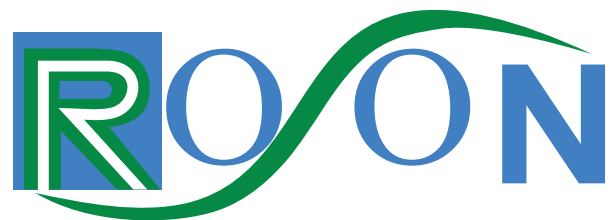

KLT6220-N9



Biosanitizer E

Tibbi avadanlıqların üzərində olan avtoklav oluna bilməyən, termo həssas olan qurğuların, hissələrin dezinfeksiya olunması üçün hazırlanmışdır. Cərrahi alətlər, endoskoplar və bütövlükdə hər bir zərif endoskopik avadanlıqların dezinfeksiyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

% biosanitizer H2O efficiency

İstifadə qaydası

	%	Biosanitizer	Su	Təsir müddəti
ECO	0.5	5 ml	995 ml	60 dəq
OPTIMAL	2	20 ml	980 ml	15 dəq



Biosanitizer F

Yuyula bilən səthlərin-döşəmənin, divarların, stolların, yoxlama çarpayılarının, xərəklərin səthini dezinfeksiya etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Məhlə köpüklənir və istifadədən sonra yuyulma tələb etmir. Mikrofiber və yaxud Saniswiss silgici ilə istifadə olunması tövsiyə olunur.

İstifadə qaydası

		Biosanitizer	Su	Təsir müddəti
ECO	2.5	25 ml	975 ml	15 min. disinfectant*
BAKTERIA	5	50 ml	950 ml	5 min. 2-in-1
GÖBƏLƏK	5	50 ml	950 ml	15 min. 2-in-1
VIRUS	5	50 ml	950 ml	15 sec. 2-in-1



Biosanitizer L

Çamaşırları dezinfeksiya edir, pis qoxulardan, patogenlərdən azad edir. Təbii və sintetik, rəngli və bəyaz parçalar üçün idealdır. Həm əl, həm maşın ilə yumada istifadə oluna bilər. 5kq-lıq toz 500kq paltar yumağa kifayət edir ki bud a məhsulun yüksək dəyər effektindən xəbər verir.

İstifadə qaydası

	Biosanitizer tozu	Paltarın çəkisi
NORMAL	10 - 15 g	1 kg
ÇİRKLI	20 - 25 g	1 kg
ÇOX ÇİRKLI	30 - 40 g	1 kg

BIOSANİTİZER S.

Su əsaslı 2 %-dən çox olmayan aktiv oksigenli, inovasiyalı emal prosesi nəticəsində gücləndirilmiş məhlul klassik kimyəvi dezinfeksiyonlara alternativdir. Heç bir zərərli yan təsirlərinin, toksinləşmənin olmaması və istifadə rahatlığı Biosanitizer S məhsulunu gündəlik istifadə üçün tam əlverişli edir. Bütün stomatoloji cihazların səthi üçün əvəz edilməz antiseptik məhsuldur.

TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, HCV, HIV, BVDV, human influenza, SRAS, vaccinia, H5N1, H1N1, EN 14476, bactericide EN 1040, EN 1276, fungi-yeast EN 1275, EN 1650, EN 13624, tuberculosis EN 14348



NƏMLƏNDİRİCİ KÖPÜK

Su əsaslı inqilabi antiseptik nəmləndirici formulasıyası aktiv oksigen və əllərin tez quruması üçün cüzi miqdarda spirtədən təşkil olunmuşdur. Onun zəngin köpüyü yumşaq şəkildə və hər hansı bir güc sərf etmədən tətbiq olunur. Biosanitizer H mikrob növlərinin çoxu üzərində öz səmərəliliyini qoruyur. O həmçinin Lateks, Nitril və Vinil əlcəklər ilə də uyğun gəlir və dermatoloji testdən keçirilmişdir.

TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, HCV, HIV, BVDV, human influenza, SRAS, vaccinia, H5N1, H1N1, norovirus, EN 14476, bactericide EN 1040, EN 1276, EN 1500, fungi-yeast EN 1275, EN 1650



ALƏTLƏR ÜÇÜN KONSENTRASIYA

Özünün PH7 xüsusiyyəti ilə ən həssas instrumentlər (frezlər, fırlanan alətlər) daxil olmaqla bütün növ alətlərə uyğunluğundadır.

150 litr məhlulun əldə olunması üçün 750ml-lik flakon ilə doldurulmuş dezinfeksiyonun kifayət etməsi məhsulun yüksək dəyər effektivindən xəbər verir. Yalnız optimal mikrobioloji nəticələrə zəmanət verməklə kifayətlənmir, bundan əlavə hər istifadədə alətlərin parlaqlığını bərpa edir.

- 0.5%lik məhlul əldə etmək üçün 1 litr suya 5ml əlavə edirik. Saxlama müddəti 1 saat.
- 1%lik məhlul əldə etmək üçün 1 litr suya 10ml əlavə edirik. Saxlama müddəti 30 dəqiqə.
- 2%lik məhlul əldə etmək üçün 1 litr suya 20ml əlavə edirik. Saxlama müddəti 15 dəqiqə.

%	Biosanitizer	Su	Təsir müddəti
0.5	5 ml	1 L	60 min
1	10 ml	1 L	30 min
2	20 ml	1 L	15 min

TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, PRV, HCV, HIV, BVDV, human influenza, vaccinia, H5N1, H1N1, HSV1, Herpes, EN 14476, bactericide EN 1040, EN 3727, EN 14561, MRSA, yeasticide EN 1275, EN 13624, EN 14562, mycobactericide EN 14438

ASPIRASIYA ÜÇÜN KONSENTRASIYA

5 l-lik qatışıq ilə 250 litr məhlulun əldə edilməsi mümkündür. Ərpi, lillənməni və çöküntünü aradan qaldırmaq üçün hər hansı əlavə məhsula ehtiyac yoxdur. Biosanitizer 4-ü 1-ində. O eyni zamanda təmizləyir, dezinfeksiya edir, deodorizə edir və aspirasiyanı, tüpürçək qabını və amalgam separatorunu qoruyur və tezliklə sistemin rahat və təmiz işləmə fəaliyyətini bərpa edir.

TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, HCV, HIV, BVDV, human influenza, SRAS, vaccinia, H5N1, H1N1, norovirus, EN 14476, bactericide EN 1040, EN 1276, EN 1500, fungi-yeast EN 1275, EN 1650



STRETCH WİPES DARTMA SALTETLƏR



Klassik spirtli kağız salfetlərdən fərqli olaraq Biosanitizer S çəkmə salfetləri qalın və dartıla biləndir. Qətiyyəyən cırlımlır və uzun müddət nəmliyini saxlayır. Faydası ondadır ki eyni zamanda tək bir silgi ilə 4 m² qədər yeri silmək və dezinfeksiya etmək olar.

TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, HCV, HIV, BVDV, human influenza, SRAS, vaccinia, H5N1, H1N1, EN 14476, bactericide EN 1040, EN 1276, fungi-yeast EN 1275, EN 1650, EN 13624, tuberculosis EN 14348,

ÖLÇÜ MATERIALLARI ÜÇÜN KONSENTRASIYA

Ekoloji xüsusiyyətinə görə Biosanitizer M ölçü materiallarının (Alqinat, Silikon, Poliefir və s.) stabil qalmasına təminat verir. O cəmi 5 dəqiqə ərzində bakteriyaları və virusları məhv edir. Konsentə olunmuş 1000 qr. qab 200 litrə qədər məhlulun əldə olunması üçün yetərlidir. Bu hiper-aktiv qatılaşdırılmış formula çirkab suyun ətraf mühitə təsirinin azaldılması zamanı böyük qənaətdə səbəb olur.

TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, HCV, HIV, BVDV, Herpes virus, bactericide EN 1040, EN 13727, EN 14561, fungi-yeast EN 1275, EN 13624, EN 14562, tuberculocide EN 14563





Aspirasiya məhlulunun istifadəsini asanlaşdırmaq üçün tam əlverişli və rahat qab



AUTOMAT

Səthlərin mexaniki dezinfeksiya edilməsi ehtiyatsızlığa görə bir sıra risklər yarada bilər. Biosanitizer automate vasitəsi ilə iş səthlər avtomatik dezinfeksiya olunur və hər hansı dental assistentin mexaniki fəaliyyətinə ehtiyac duyulmur. Biosanitizer automat-ın işi bir ədəd Biosanitizer S-in aparata bağlanması ilə ifadə olunur. Biosanitizer S prosedür zamanı bioqaz formasına çevrilir və mikrobların öz-özünə məhv olunmasına səbəb olur. Cəmi 5 dəqiqə ərzində ətraf avtomatik dezinfeksiya olunur. Dezinfeksiya prosesindən sonra səthlərdə hər hansı bir iz, nəmlik və zədələnmə olmur.



TƏSİR EFEKTİ:

virucide HBV, HCV, HIV, BVDV, human influenza, SRAS, vaccinia, H5N1, H1N1, EN 14476, bactericide EN 1040, EN 1276, fungi-yeast EN 1275, EN 1650, EN 13624, tuberculosis EN 143488

SOAKING TRAY


Alətləri antiseptik məhlulda islatmaq üçün qab



Biosanitizer.

Mikro instrumentlərinizin (borlar, frezlər, diskələr) antiseptik məhlulda isladılması üçün qab.

3 Times Pre-vacuum Steam Sterilizer TANDA C18

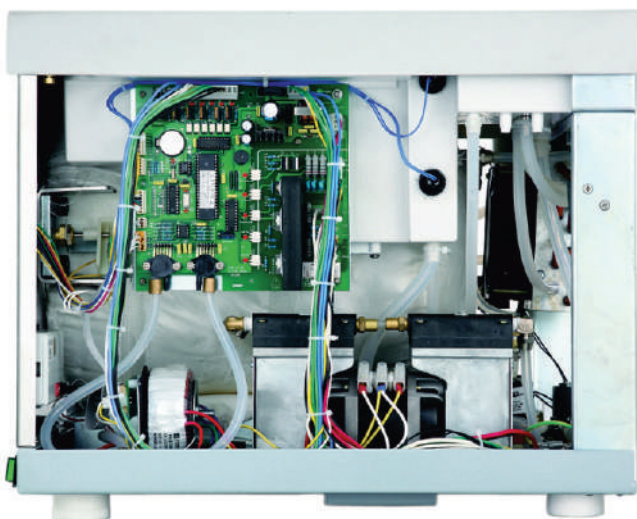

Faro şirkəti yüksək performans axtaranlara çox münasib qiymətə yeni stomatoloji işıqlarını təklif edir.

Güclü, etibarlı, ən son xüsusiyyətləri LED işıq texnologiyasını özündə cəmləşdirən FARO işıqları dünyada tanınır və ən qabaqcıl stomatoloji qurğular brendlərinin seçimidir. Yeni, gözəl dizayn və ergonomik oynaqlar keyfiyyətli alüminium ərintisindən hazırlanmış və rənglənmişdir. Yenilənmiş bu dizayn asan bükülməyə imkan verir. İstər stomatoloji qurğuya, istərsə də tavana quraşdırmaq olur. Stomatoloji qurğunun dirəyinə keçirilən pinin asanlıqla müxtəlif diametrlə pinlərlə əvəz oluna bilməsi FARO işıqlarını istənilən brend stomatoloji qurğular üzərində quraşdırmağa imkan verir.

ALYA



MAIA




EDI



SELLA 2

Buxar sterilizasiyası üçün lazım olan paketlərin möhürlənməsi üçün nəzərdə tutulan, cəlbədicə, idarəsi asan olan və aşağı istismar dərəcəli paketləmə aparatı.

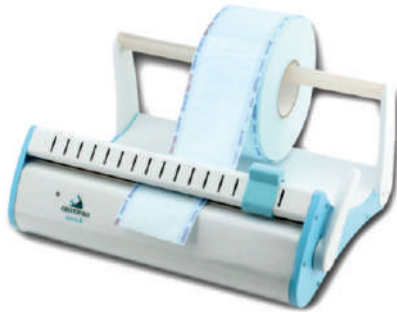

Distillə aparatı: Sürətli və səmərəli

5 saatdan az müddətdə 3litr suyun saflaşdırılması
6 karbon filteri
Təmizlənmə sona çatdıqda avtomatik sönmə
Ölçülər 23 sm - 36 sm
Çəkisi 3,5 kq



SL 13

Qiymət və keyfiyyət baxımından yüksək performans nümayiş etdirən profesional avadanlıq tələb edən istifadəçilər üçün əla seçimdir.





SINCE 1948: EXPERIENCE
AND INNOVATION

İtaliyanın məhşur **Faro** şirkətinin, SMT və ən son elektron texnologiyası ilə istehsal olunmuş, seçilmiş komponentləri ilə fərqlənən SK07 B klas avtoklavları sterilizasiya sektorunun önündə gedir.

- EN 13060 normalarına uyğun B klas avtoklav
- Son texnoloji yeniliklərə malik SMT (Təhlükəsiz Montaj Texnologiyası) texnologiyası ilə düzəldilən elektron Avtoklav
- SMT Texnologiyası ilə iş prosesinin bütün detallarını nəzarətdə saxlama və xüsusi rəng sistemi ilə istifadəçini xəbərdar etmə.
- Kompüterə USB çıxışından istifadə edərək qoşulma və qrafik analiz sistemi ilə bütün prosesin yoxlanması və hər hansı bir anormallığın aşkar olunması
- Görüntüsü çox rahat olan LCD ekran
- 121 və 134 dərəcədə avtoklav etmə bacarığı
- 134 dərəcədə 4 dəqiqə ərzində sürətli sterilizasiya
- 14 dəqiqə ərzində dalğalı vakum sistemi ilə qurutma
- Su və enerji sərfiyyatının ekonomikliyi
- Bir dəfə doldurulmuş distillə su ilə 10-12 dövr ard-arda istifadə etmə.
- Su çəninin mexaniki və ya avtomatik olaraq doldurulması
- Keçmişdə edilən bütün steril proseslərin ətraflı kontrolu.
- Ortaya çıxan problemlərin və iş xəstəliklərinin göstərən səsli alarm sistemi
- Təzyiq düşmədən qapının açılmasını əngəlliyən kilit sistemi.
- Avtoklava daxil olan alətlərin yazılı hesabatını verə bilən printer.
- Bowie & Dick testi, Helix testi və Vakum testləri ilə sistemi test etmə imkanı.
- Daxili printer və ya yaddaş kartı seçimi
- Ölçülər: Boy 390 mm, en 449 mm, dərinlik 660 mm
- Yaddaş Kartı model (FAR.02.743100)
- 16 litr və 21 litr həcmli formaları var.



Sterilisation roll sterr-tov

Sterilizasiya paketi. Şəffaf polietilen pylonka və ağ rəngli izolyasiya edilmiş su keçirməyən kağızdan hazırlanmışdır.



Dental Bib-Rolls Medi BİBS (stomatoloji rulon önlüklər)

Rulon önlüklər bir qat absorbant pambıq qatdan və bir qat polietilen təbəqədən ibarətdir. Yumuşaq, əla hopduran və genişdir. Önlüklər dispenserdə yumurlanmış və əvvəlcədən kəsilmiş formadadır. Ölçüsü: 60x54 sm Rəngləri: göy, yaşıl, ağ



Implantology kits (implantoloji dəstlər)

Bu geniş miqyaslı stomatoloji cərrahi dəst implantologiyada və paradontologiyada cərrahiyyə zamanı bütün ehtiyacları qarşılamağa imkan verir. Fransanın məşhur Medistock firmasının təqdim etdiyi bu cərrahi dəstlər bugün cərrahiyyənin bütün tələblərini yerinə yetirir. Tərkibinin zənginliyi etibarlı ilə dəstlərin bir neçə növü mövcuddur.



Micro Applicator

Birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan bu mikro aplikatorlar asanlıqla tətbiq etmək üçün əyilə biləndir. Bir-birinə yapışmayan liflərlə təmin olunmuş ucluq bondu asanlıqla dişə tətbiq etməyə imkan verir.






BİRDƏFƏLİK STƏKANLARI
YERLƏŞDİRMƏK
ÜÇÜN DİSPENSER



BORLARI RAHAT YERLƏŞDİRMƏK
ÜÇÜN PLASTİK QAB



FAYLLARI YERLƏŞDİRMƏK VƏ EYNİ ANDA
STERLİZASIYA ETMƏK ÜÇÜN DİSPENSER

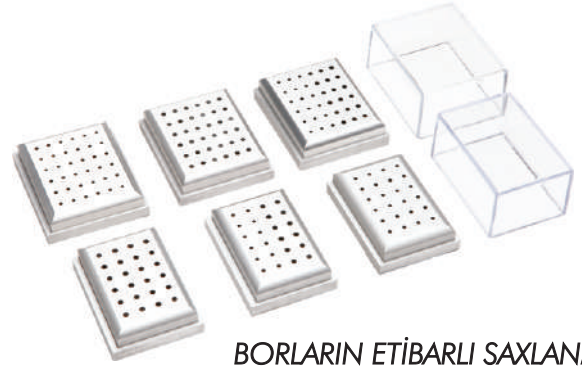

BORLARIN ETİBARLI SAXLANMASI
ÜÇÜN METAL QAB



PAMBIQDAN İSTİFADƏNT ASANLAŞDIRAN
ALİMİNİUM PAMBIQ QAB



FAYLLARIN SAXLANMASI VƏ
STERLİZASIYA EDİLMƏSİ
ÜÇÜN DİSPENSER



TÜPÜRCƏK
SORANLAR



ÖLÇÜ ALINMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN POLAD QAŞIQ DƏSTİ



ÖLÇÜ ALINMASINDA İSTİFADƏ OLUNAN QAŞIQ DƏSTİ



Tiedent
ikili komponentli
antiseptik
rentgengörnüşlü
plomb materialı



Krezodent (maye)
İnfeksiyalı kanalların
antiseptik işlənməsi



İodent
bərkıyən daimi
kanaldoldurucu material



Krezodent (pasta)
kök kanallarının plomblanması
(rentgengörnüşlü)



İodent
bərkiməyən müvəqqəti
kanaldoldurucu material



Poliset
polirovka üçün
pasta Ağ (texniklər
istifadə edir)



Kapramin
kapiliar qan
axma zamanı
kanalların işlənməsi
üçün material



İzalqin
lak (teniklər üçün)



Endoji 1
kanalların piysizləşdirilməsi
və yağsızlaşdırılması



Endoji 2
kanalların
genişləndirilməsi



Devit Arc
sinirin devitalizasyonu
için Mışyak



Endoji 3
kanalların
antiseptik işlenmesi



Devit S
sinirin devitalizasyonu
için mışyaksız pasta



Endoji 4
hemostatik maye



Rezodent
çetin keçilen
kanalların
plomblanması
için material



Monomer S
sinmanın suyu



Endogel
çetin keçilen
kanalların mexaniki
genişlenmesi



Monomer P
protakril suyu



Eugenol (maye)



Pulpevit
kəskin pulpit
halında kanalın
antiseptik işlenmesi



Monomer F

ftoraks suyu



Dentin Pasta

müvəqqəti plomb materialı



Monomer Akr 7



Slidont

silikofosfat tərkibli plomb materialı



Temokor

müvəqqəti koronka üçün material



Unifas



Protakril maye



Alvanes

(homostatik süngər)



Kalcelayt

izoləedicı araqat (ışıqla bərkiyən)



Kalcevit

dərin kariesin müalicəsi üçün araqat (kimyəvi bərkiyən) rentgengörünüşlü



Belovaks
Bazis mumu



Anhidrin
dişlərin piysizləşdirilməsi və yağsızlaşdırılması üçün maye



Belacin
ikili komponentli silikat tərkibli plomb materialı



Cemion F
ikili komponentli şüşəionemer tərkibli fiksasiya üçün sement



Yodaform
Antiseptik vasitə



Belodez
hipoxlarid natri tərkibli kök kanallarının antiseptik işlənməsi üçün maye



Beladont
silikofosfat tərkibli plomb materialı



Eodent
Sinkoksidedvqenol tərkibli plomb materialı



Belak F
bir komponentli ftorlak (dişdə olan həssaslıq üçün)



Sink oksid
(toz halında)

Glass liner

Yüksək müqavimətli və dentinə yaxşı yapışma xüsusiyyəti olan rentgen şüası keçirməyən və işıqla bərkiyən şüşə ionomer maddəsidir. Bütün növ doldurucu maddələrin altında istifadə edilə bilər.

Texniki göstəriciləri:

Dözümlülüyü: 200 Mpa
Sərtləşmə dərinliyi: 5mm

Qablaşdırılma şəkli:

glass liner, 1 x 2ml şpris + şpris ucluğu



Rodex

ışıqla polimerləşən akrilik

Tətbiq sahəsi: Sabit və hərəkətli protezlərdə

Texniki göstəricilər:

- Qarışdırılma porsiyası: 1/3 (maye/toz)
- Xəmirləşmə vaxtı: 20 °C-də 10 dəqiqə
- Təsir müddəti: 45 dəqiqə
- Bərkimə müddəti: 20 dəqiqə
- Qarışdırılma müddəti: 30 saniyə



Plaque Photo

Hibrid kompozit əsaslı işıqla bərkiyən qaşıq

Bu qaşıqlar ultrabənövşəyi və halogen işıqların təsirindən çox tez bərkimə və güclü yapışma xüsusiyyətinə malikdir. Qeyd edək ki, ölçünün keyfiyyəti dəyişmir.

Tətbiq sahəsi:

- funksional qaşıq düzəldilməsində və ölçü alınmasında.
- Okklüzial ölçü alınmasında

Texniki göstəricilər:

Viskozit genişlənməsi: 14.0 - 19.0 mm.

Gün işığına qarşı dözümlülüyü: 20 dəqiqə.

Hər iki tərəf üçün işıqlanma müddəti: 3-5 dəqiqə.



Securafix

Xüsusi bir şüşə ionomer semen olub dentin və minaya tətbiq edilir. Qapaqları, körpülərin, inley, onleylərin və otodontik həlqələrin yapışdırılması üçün istifadə edilir.

Texniki göstəricilər:

İşləmə vaxtı: 3 dəqiqə.

Bərkimə vaxtı: 5.5 dəqiqə.

Dözümlülüyü: 100 Mpa.

Suda həllolması: 0.2%.

Təbəqə qalınlığı: < 20µ.

Qarışdırılma miqdarı toz/maye 2.6:1 (qr./qr.)

Qablaşdırılma şəkli:

24 qr. toz, 7 qr. maye + ölçü qaşığı



Vision Prophy Powder

Dişlərdəki ləkə və diş daşlarının təmizlənməsində istifadə edilir. Təmizlənmiş sahəyə parıltı verir. Air Flow aparatı vasitəsilə tətbiq edilir. Çəkisi 500 qramdır.



Vision Prophy Powder

Vision Prophy Powder profilaktik toz olub bütün növ air-polishing (hava axını ilə təmizləyən, cilalayan) cihazlarına uyğundur.



Competence Flow

Bis-akrilik materialların restorvasiyası və III, IV, V sinif boşluqların plomb ilə bərpası üçün axıcı, radiopak kompozit. Cilalanır və istifadə zamanı axıcıdır.



Competence HC

Competence High Class Bis-GMA asası olan, işıqla bərkiyən monokomponent kompozitdir. Yüksək sabitlik, yeyilməyə qarşı davamlılıq, rəng sabitliyi və yüksək cilalanma qabiliyyəti bu məhsulun əsas səciyyəvi xüsusiyyətidir. Şəffaf "Vita shade"lər təbii dişin minasına bənzər estetik görüntü əldə etməyə imkan verir. Competence HC həm set kimi həm də tək mövcuddur. Competence flow ilə kombinasiya edilə bilər. İstifadəsi Frontal dişlərdə III, IV, V sinif karioz boşluqlarda Molyar bölgələrdə III, IV və V sinif karioz boşluqlarda ön dişlərin travmatik zədələnmələrindən sonra bərpasındakı rəngi dəyişmiş ön dişlərdə estetik nəticə üçün rəng və formanın düzəldilməsi zamanı qapaq altına dişlərin hazırlanması zamanı



Competence universal

Anterior və posterior dişlərdə III –V sinif boşluqlarda istifadə olunan işıqla bərkiyən universal hibrid kompozit. Competence universal rəng sabitliyinə malik, parlaq, cilalanan və uzun müddətli estetikani təmin edən plomb materialıdır. Eyni zamanda vinirlərdə də istifadə oluna bilər. Competence flow ilə kombinasiya edilə bilər.



Competence special

Anterior bölgələrdə və süd dişlərində istifadə olunan işıqla bərkiyən mikrohibrid kompozit. Competence special rəng sabitliyinə malik, parlaq, cilalanan və uzun müddətli estetikani təmin edən plomb materialıdır. Competence flow ilə kombinasiya edilə bilər.

Tətbiq sahəsi:

Anterior və posterior bölgələrdə III-V sinif boşluqların plomb ilə bərpasında



Extra-Gel

Diş minasını turşu ilə aşındırmaq üçün istifadə olunan 37% fosforik geldir. Mavi rəngdədir.

Tətbiq sahəsi: diş minasını turşuyla aşılması üçün

Texniki göstəricilər: 37% fosforik turşu



P-Cem

Tərkibində evgenol olmayan keçici tac yapışdırıcısıdır. Bu məhsul kalsium hidroksid əsaslı olduğu üçün elastikdir, eləcə də çox asan təmizlənmə xüsusiyyətinə malikdir.

Texniki göstəricilər:

Təsir müddəti: 1-2 dəq.

Bərkimə vaxtı: 3-6 dəq.

Qablaşdırılma şəkli: 1x25 qr. əsas qat 1*25 qr katalizator



Dent-a-cav

Müvəqqəti plombdur. Çürük diş boşluğunun təcili müalicəsində istifadə olunan sintetik əsaslı bu güclü yapışqan, boşluqları da tamamilə qapayır. Tərkibində evgenol yoxdur. Pulpa və diş ətinə zərər yetirmir.



Securafil

Şüşə ionomer əsaslı doldurucu maddədir. Beş fərqli rəngdə mövcud olub, mükəmməl uyğunlaşma xüsusiyyətinə malikdir. Toz və maye şəklindədir. Tərkibində fluor var və 15 dəqiqə ərzində cıllanmaya hazır vəziyyətdə olur.

Texniki göstəriciləri:

Təsir müddəti: 1,5-2 dəq.

Bərkimə müddəti: 3 dəq.



Calcident 450

Rentgen şüası keçirməyən, su əsaslı kalsiumhidroksid pastası. Kalsident pulpanı asit tərkibli ölçü maddələrindən qoruyur. Tez quruyur və eyni zamanda müvəqqəti doldurucu maddə kimi də istifadə edilə bilər.

Tətbiq sahəsi: Direkt və indirekt pulpa örtücü kimi istifadə edilir. Müvəqqəti doldurucu maddə olaraq istifadə edilir.

Texniki göstəriciləri: 45% kalsium hidroksid
PH dəyəri - > 12

Qablaşdırılma şəkli: calcident 450, 1 x 2.0ml şpris



C-Bond

Universal bonding maddəsi olub dentin və aşılانmış minaya tətbiq edilir. Bütün restavratsiya maddələri ilə kimyəvi əlaqəyə girərək son dərəcə qüvvətli bir birləşməni təmin edir.

Tətbiq sahəsi: dentinlə kompozit arasında elastik əlaqə yaradır.

Texniki göstəricilər: müqaviməti: 12Mpa

Qablaşdırılma şəkli: 1x5 ml / 1x10 ml





Absorbent Paper Points

Kanalları qurutmaq üçün istifadə edilir.

Gutta Percha Points

Kanal doldurmaq üçün istifadə edilir.



Sure Cord

Kəsici başlı toxuma retraksiya sapı. Bu sap 100% pambıqdan ibarət olub, digər növlərə nisbətən yüksək hopduruculuq qabiliyyətinə malikdir.

Altı ölçüdə mövcuddur: 000, 00, 0, 1, 2, 3

Hər bir sap özünün kəsicisinə malikdir.

Poladdan hazırlanan bu kəsici qapağa yerləşdirilir ki, bu da istifadəni asanlaşdırır.

siscon

swiss star dental implants

a breath of swiss air in implant dentistry

SISCON-un ideya əsaslarının yaranması 1980-ci illərə təsadüf edir. Həmin illərdə təsisçilərin Oral İmplantologiya sahəsində gözlə gördükləri, tədqiq edərək topladıqları təcrübə SWISS STAR dental implant sisteminə öz əksini tapıb. SISCON özünün SWISS STAR dental implant sistemini İsveçrədəki təcrübəli həkimlər, ixtisaslaşmış təchizatçılar və yüksək keyfiyyətli istehsalçılarla sıx əməkdaşlıq şəraitində inkişaf etdirərək istehsal edir.

SISCON-un məqsədi tam dişsiz və ya qismən dişsiz pasiyentləri iqtisadi cəhətdən uyğun, yüksək keyfiyyətli dental texnologiya ilə təchiz etməklə, sümük implant bərpasını təmin etməkdir.

Özünəməxsus işlənmə, maksimal dəqiqlik və istifadəçi rahatlığının təmini SISCON-un əsas prioritetidir.

Dizayn, səth, mexaniki və bioloji xüsusiyyətlər, istifadə olunan material və müalicə proseduraları, bir sözlə SWISS STAR dental implant sisteminin hər bir aspekti bu günə uyğun olan ən yaxşı cəhətləri özündə cəmləşdirir. Bu xüsusiyyətlərin hər biri kompleks şəkildə ciddi kliniki sənədləşmədən keçib.

Bütün bunlar elmi-tədqiqat mərkəzləri, texnologiya təchizatçıları və digər maraqlı təşkilatlarla daimi və sıx əməkdaşlıq şəraitində iki əsas məqamı: pasiyentlərin həyat keyfiyyətinin uzun müddətli yaxşılaşdırılması və Oral İmplantologiyaya olan rəğbətimizi SISCON-un hər bir məhsulunda əks etdirməklə həyata keçirilir.



İMLANT - YIV DİZAYN MÜLAHİZƏLƏRİ

İmplantın ən koronal nöqtəsinin üçdə bir hissəsi az miqdarda konusvaridir. Bu o deməkdir ki implantın üzərindəki yivlər koronal hissədə krestal sümüklə təmasda olarkən tədricən dayazlaşaraq mikro yivlərlə əvəz olunur ki bu da stabilliyi artırmaq üçün daha səmərəlidir. Apikal hissənin konusvari olması isə implantın yuvaya daxil olmasını sadələşdirir. İmplantın apeksi dairəvi hamar hissə ilə qurtarır ki, bu da Şneyder membranı, aşağı çənə siniri kimi incə anatomik strukturların potensial zədələnməsinin qarşısını alır.



PLATFORMA / İMLANT NECK DİZAYNI

"Bone level" dizayn formasına əsasən implantın boyun hissəsinə kiçik yivlər əlavə olunmuşdur. Bu dizayn xüsusiyyəti çeynəmə qüvvəsinin paylanması zamanı implant və sümük arasında möhkəm əlaqə yaradır, həmçinin, boyun hissədə (platformada) sümük itkisini tamamilə məhdudlaşdıraraq, sifra endirir.



İMLANT ABATMENT BİRLƏŞMƏSİ

İmplant və abatement arasında birləşmə yaratmaq üçün sistemə "morse taper" dizayn forması əlavə olunmuşdur. Bu mükəmməl konfigurasiya sümüyə düşən yükü aradan qaldırır. Bundan əlavə abatementin implanta keçən hissəsinin implantın daxili hissəsi ilə dəqiq uyğunluğunu təmin edir. Daxildəki sözügedən konusvari dizayn, abatement və implant arasında sıx əlaqə yaradaraq, mikro tərpənmələrin və mikro sızmaların qarşısını alır. İmplantın daxilinin altıbucaqlı olması abatementin altı pozisiyalı mövqedə möhkəmliyini təmin edir.


siscon

swiss star dental implants

a breath of swiss air in implant dentistry

CƏRRAHİ DƏST ÜÇÜN QUTU

Cərrahi alətlərin təhlükəsiz saxlanması,
tətbiqi və steril olunması üçün metal qab.

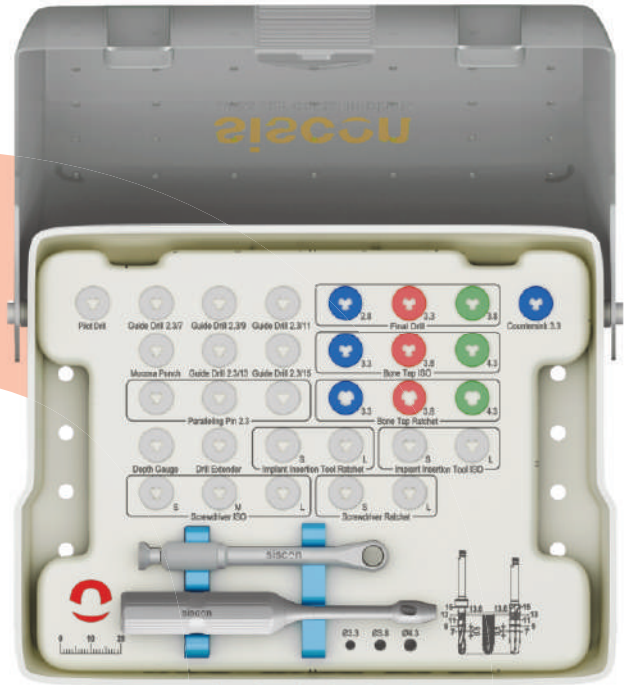

YUXARI ÇƏNƏ ÜÇÜN VİNT AÇAN



TORQ AÇAR




siscon

swiss star dental implants

a breath of swiss air in implant dentistry

Implant Ø 3.3

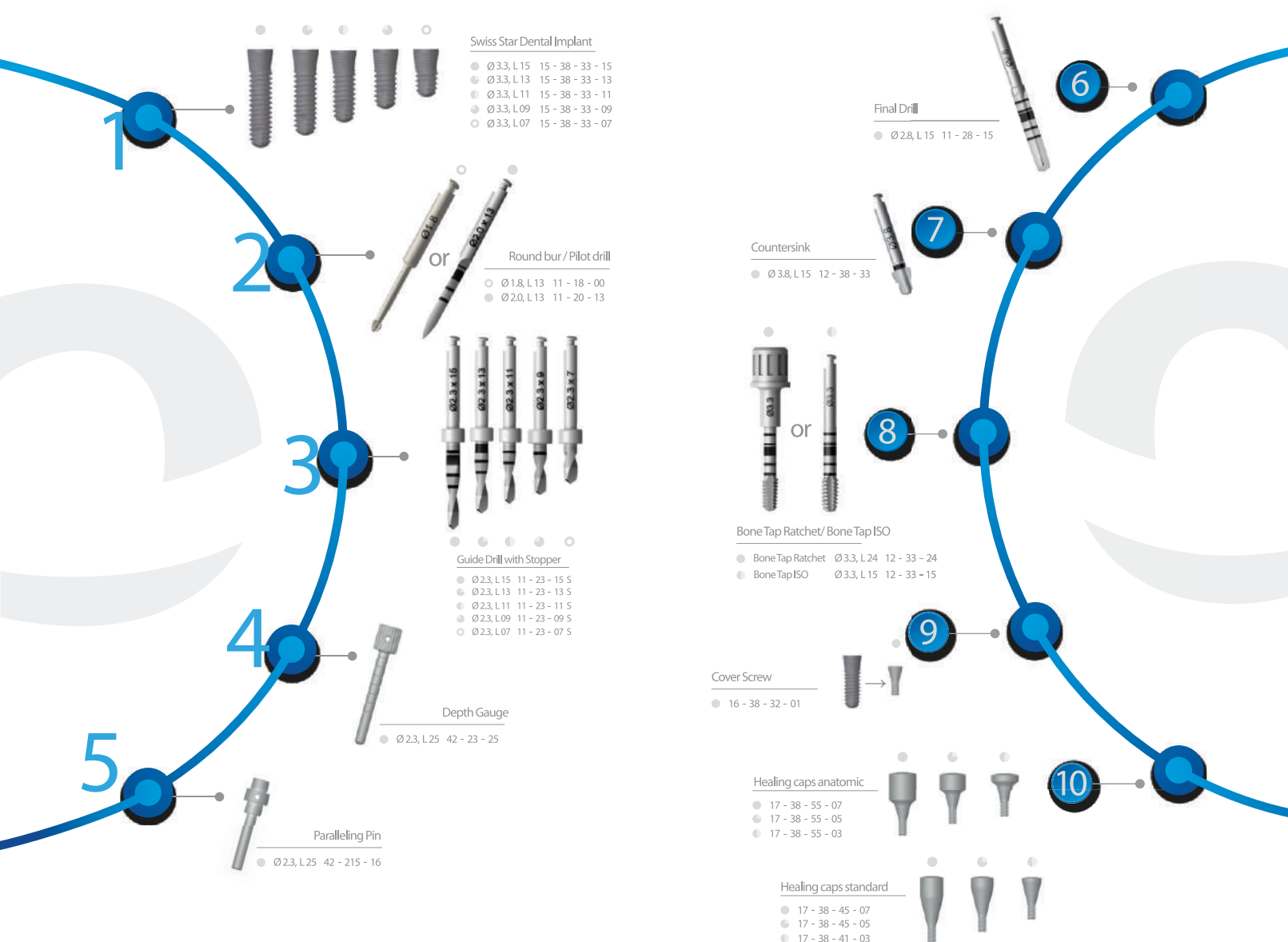


sicon

swiss star dental implants

a breath of swiss air in implant dentistry

Implant Ø 3.8

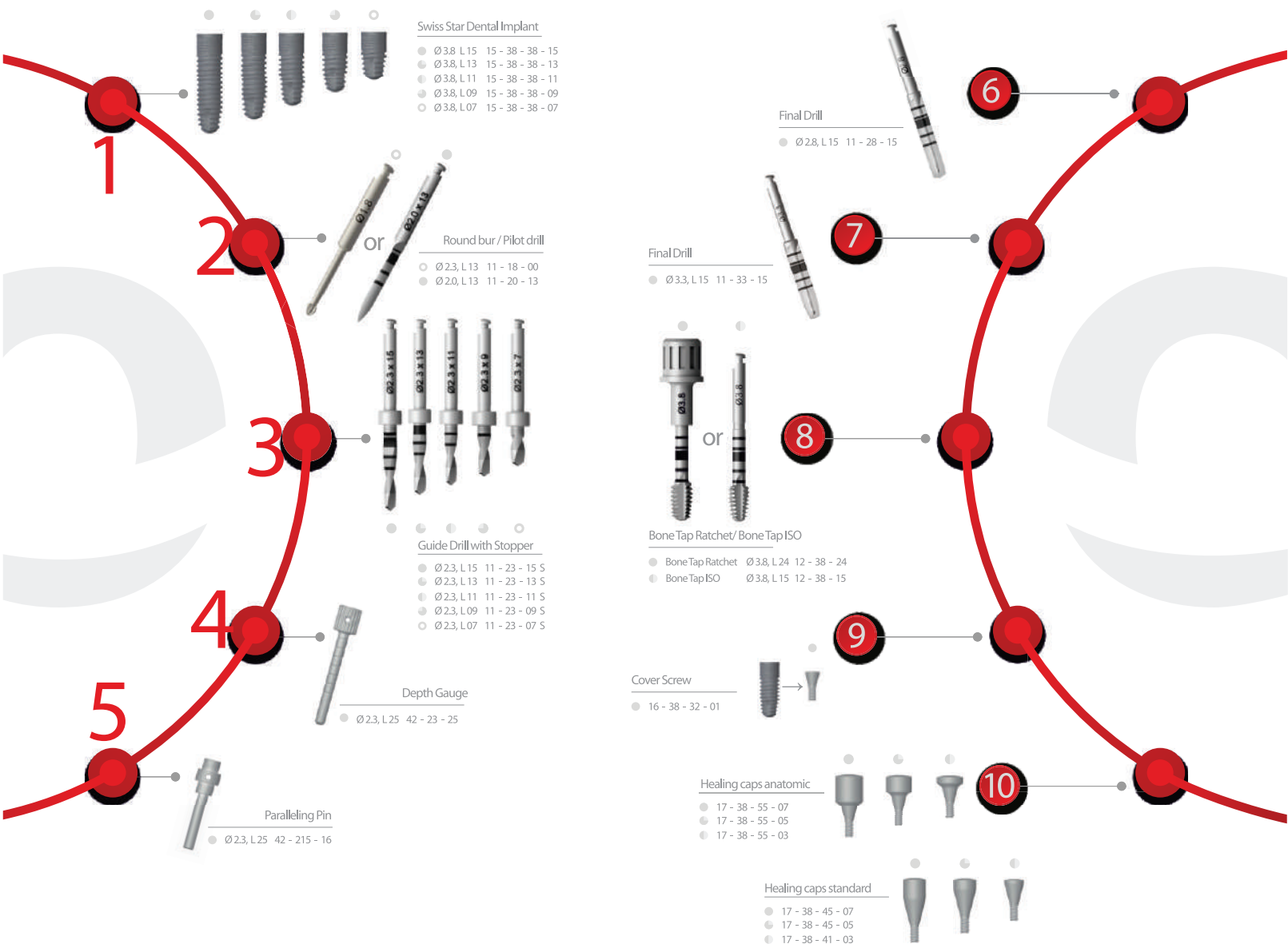


siscon

swiss star dental implants

a breath of swiss air in implant dentistry

Implant Ø4.3

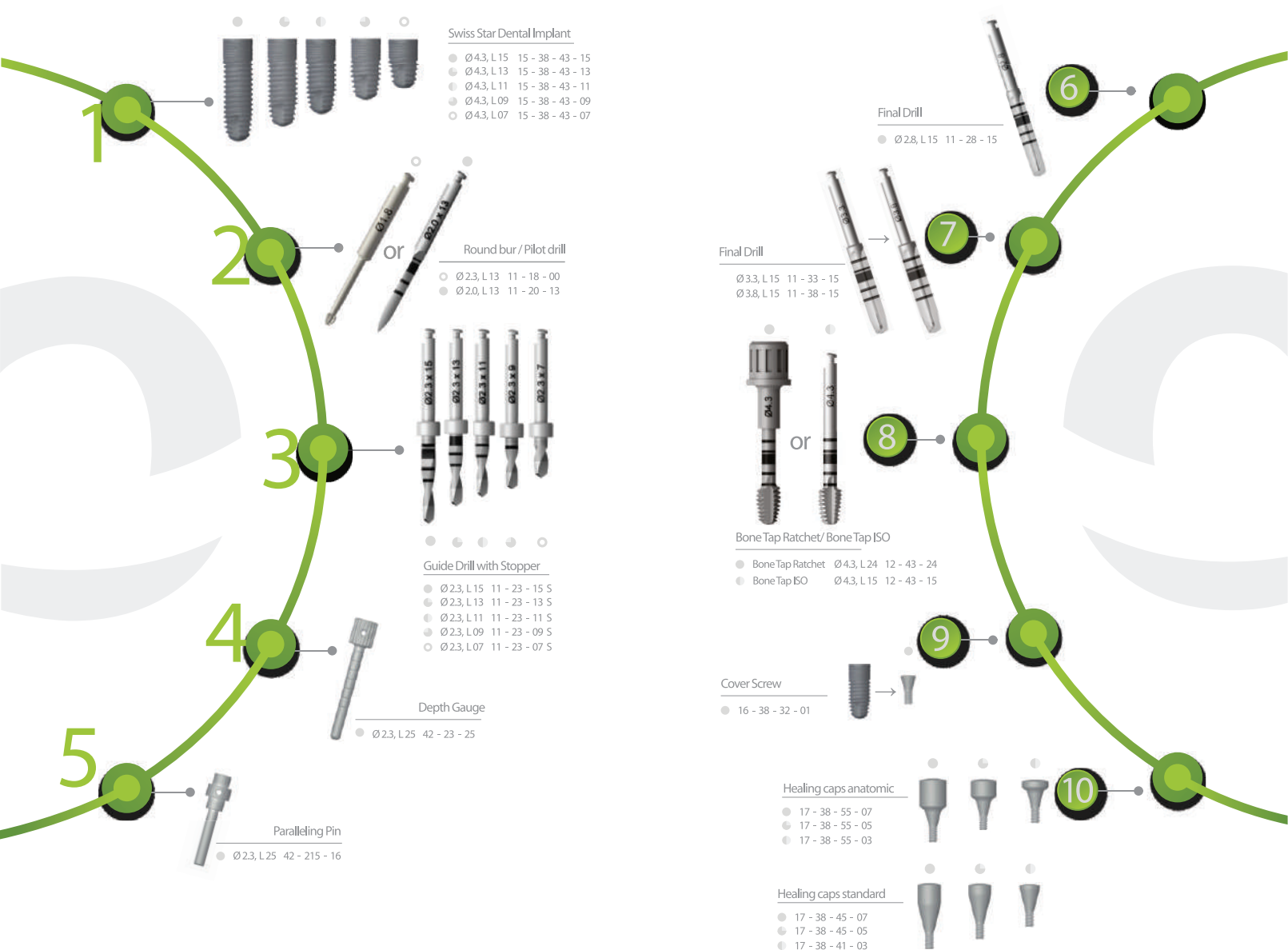

KOHLER®

MEDIZINTECHNIK

Almaniya istehsalı olan KÖHLER alətləri yüksək keyfiyyət standartlarına malikdir. Bu alətlər təcrübəli işçilər və müasir xüsusi maşınlar tərəfindən təmiz poladdan hazırlanır. İstehsal və materiala nəzarətin diqqətlə incələnməsi son dərəcə qiymətli alətlərin təminatına zəmanət verir. Kəlbətinlər sınıma qarşı zamanətlə təmin olunub. Digər bütün alətlər isə material və istehsalda yaranmış problemlərə qarşı zəmanət daşıyır. KÖHLER istənilən vaxt satış sonrası sürətli və etibarlı xidmətə zəmanət verir. İstehsal etdiyimiz məhsulların keyfiyyətini davamlı olaraq yeniləmək və inkişaf etdirmək bizim şirkətin siyasət və öhdəliyidir.



QRAFT DAŞIYICI

Biomaterialı asanlıqla yuvaya yerləşdirmək, sökülən və sterilizə olunan boruya malik şpris



CƏRRAHI ASPIRATOR

Nazik ucluqlu sürətli sormaya malik titan tərkibli

MINVALUX DƏSTİ

Həm vaxta qənaət, həm də alveolda sümük itirmədən diş çıxarmaq üçün yeni dizaynli elevator dəsti



RETRAKTOR

Yanağı və yumşaq toxumayı saxlamaq üçün müxtəlif formalı



RASPATOR PERIOS ELEVATOR

Yumşaq toxumayı sümükdən ayırmaq üçün nazik və qalın ucluqlu, ikitərəfli yüngül perios elevatorları

AÇIQ SINUS LIFT ELEVATORLARI

Sneyder membranını zədələmədən qaldırmaq üçün istifadəsi çox rahat müxtəlif formalı elevatorlar



İYNƏ SAXLAYANLAR

Müxtəlif uzunluq və formalarda (düz, əyilən, qayçılı) nazik və qalın ucluqlu titan tərkibli



SKALPEL DƏSTƏYİ

Fiksasiyaya malik hər tərəfə fırlana bilən müxtəlif forma və ucluqlu dəstəklər və skalpel ucluqları



ÖLÇÜ ALƏTİ

Həm iki implant arası məsafəni, həm planlaşdırın, həm də kəsikdən sonra çənə sümüyünün qalınlığını ölçən



SÜMÜK TƏLƏSİ BONE COLLECTOR

Autoqraft sümük toplamaq üçün titan və plasmas filtrli sümük tələsi



SÜMÜK QAŞIYAN BONE SCRAPERS

Sümüyü istənilən nahiyyədən qaşayıb başqa nahiyyəyə köçürmək üçün



SÜMÜK XIRDALAYAN BONE MILL

Xəstədən alınmış sümüyü (autogen) xırdalamaq üçün



MIKRO –PERIODONTOLOJİ DƏST

Iti və 8 müxtəlif ucluğa titan tərkibli paradontal kureyt və bıçaqlar



MUKATOM TISSUE PUNCH

Yumşaq toxumanı əl və ya ucluqla dairəvi kəsmək üçün



QAYÇILAR SCISSORS

Tikiş sökmək, yumşaq toxumanı ayırmaq, sap və membranı kəsmək üçün müxtəlif uzunluq və formalı



ÖLÇÜ QAŞIQLARI WINTRAY

4 seqmentdən ibarət rahat açılıb-bağlanan və sterilizə oluna bilən



TREOPAN

Sümük köçürülmə zamanı sümüyü dairəvi kəsmək üçün Elevator 600-dən çox növü olan kök elevatorları atravmatik çıxarmaqda əvəzsizdir



ELEVATOR

600-dən çox növü olan kök elevatorları atravmatik çıxarmaqda əvəzsizdir



KƏLBƏTİNLƏR FORCEPS

400 növdən çox müxtəlif növ modelə malik KÖHLER kəlbətinlərinin ucları təhlükəsiz və sürüşməyəndir.

MUCOGRAFT

Mucograft özünə məxsus 3D kollagen matriks olub spesifik olaraq ağız boşluğunda yumuşaq toxuma rəqenerasiyası üçün hazırlanmışdır. Mucograft keratinləşmiş toxuma yaratmaq və çəkilməmiş diş əti yerlərini bağlamaq üçün hazırlanmışdır.



İki strukturdan ibarətdir.

Six tərəf yaranı açıq qoyarkən sabitlik yaratmağa imkan verir.

Məsaməli tərəfi isə yumuşaq toxuma hüceyrələrinin qreftin içinə doğru böyüməsinə şərait yaradır və sabit qan dövriyəsini əmələ gətirməklə laxtalanmanın qarşısını alır.

- Avtogen toxuma köçürməindən fərqli olaraq ağız boşluğunda hər hansı bir toxuma bölgəsinin zədələnməməsi
- Avtogen qreft ilə müqaisədə daha az ağrı.
- Avtogen toxuma köçürməsinə nisbətən daha az vaxt sərfi.
- Təbii yumuşaq toxuma rəngi.
- Erkən vaskularizasiya və yumuşaq toxumanın yaxşı inkişafı.
- Üstü açıq vəziyyətdə belə mükəmməl yara sağlması.
- Asand tutma və quru tətbiq.

ÖLÇÜLƏRİ

15x20, 20x30 mm



GEISTLICH BIO-OSS PEN



QABLAŞDIRMA ŞƏKİLİ

0.25 gr, 0.5 gr

Geistlich Bio-Oss qranulları Geistlich Bio-Oss Pen adlanan aplikator ilə də tətbiq olunur. Geistlich Bio-Oss Pen əvəzləyici sümük materialını cərrahi hissəyə daha sürətli və daha düzgün tətbiq etməyə imkan verir. Geistlich Bio-Oss Pen vaxt sərfiyyatını azaldır. Beləki öncədən aplikatora doldurulmuş qranulalar isladılan kimi istifadəyə hazır olur. Aplikator qranulaların istər fizioloji məhlul, istərsə də xəstənin qanı ilə asanlıqla isladılmasına imkan verir. Əyilmiş aplikator ucluqları ilə təmin olunmuşdur ki, bu da qranulaların arxa hissələrdə asanlıqla yerləşdirilməsinə kömək edir. Geistlich Bio-Oss Pen qranulaların optimal sümükləşməsinə təmin edir.

- İri və xırd qranulardan ibarət olmaqla iki formada hazırlanır.
- İri qranulalar əsasən sinus divarının qaldırılmasında və geniş sümük qüsurlarında istifadə olunur.
- Xırd qranulalar isə diş ətrafının sıx sümük divarı ilə təmin olunmasında və kiçik sümük qüsurlarında istifadə olunur.

GEISTLICH BIO-GIDE

Geistlich Bio-Gide kollagen membran olub standartlaşmış və yüksək nəzarət altında olan istehsal prosesi nəticəsində əldə olunmuşdur. Baytarlar tərəfindən təsdiqlənmiş, donuzlardan əldə olunan bu membran immunoloji reaksiya verməməsi üçün xüsusi diqqətlə təmizlənmişdir. Geistlich Bio-Gide iki tərəfli struktura malikdir. Məsələli hissə sümüyə tərəf qoyulur ki bu da sümüyün mineral hissəciklərinin məsələlərin içinə doğru böyüməsinə imkan verir. Yumuşaq toxumaya tərəf qoyulan hamar hissə isə lifli toxumaların sümük defektinə dolmasına imkan vermir. Geistlich Bio-Gide ilə işləmək asandır. O asanlıqla yerləşdirilir, defekt üzərinə çox asanlıqla yapışır və cırlmaya, didilməyə qarşı müqavimətlidir.

ÖLÇÜLƏRİ

16x22, 25x25, 30x40 mm



GEISTLICH BIO-OSS COLLAGEN

Geistlich Bio-Oss Collagen periodontal qüsurlarda və çəkilmiş diş yuvasında istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur. Əlavə olunmuş kollagen gel vasitəsi ilə Geistlich Bio-Oss Collagen defektin morfolojiyasına uyğunlaşdırıla bilər və xüsusən də tətbiq etməni asanlaşdırır.

TƏRKİBİ

Geistlich Bio-Oss qranulaları və 10% kollagen gel.

PERIO SYSTEM COMBI-PACK

100 mg-lıq kollagen tərkibli sümükdən və 16 x 22 ölçülü Bio-Gide Perio membranından ibarətdir.

Kombinasiya şəklində istifadə sistemin xüsusiyyətlərini Periodontal Regenerasiya üçün optimallaşdırıb.



**Sümük regenerasiyasında 20 illik təcrübə;
Yüksək güvənlik;
Effektiv sümük bərpası;
Mükəmməl həcm.**

GEISTLICH BIO-OSS

GEISTLICH Bio-Oss öküz sümüyünün mineral hissəciklərindən əldə olunmuş təbii sümük əvəzləyicisidir. Öküz sümüyündən əldə olunmuş bu biomaterial yeni sümük əmələ gətirmək üçün peşəkarların seçimidir. Geistlich Bio-Oss əsasən sümük regenerasiyasında, implantoloji terapiyada və paradantoloji qüsurlarda istifadə olunur.

QABLAŞDIRMA ŞƏKİLİ

0.25 gr, 0.5 gr, 2 gr

- İri və xırda qranulalardan ibarət olmaqla iki formada hazırlanır.
- İri qranulalar əsasən sinus divarının qaldırılmasında və geniş sümük qüsurlarında istifadə olunur.
- Xırda qranulalar isə diş ətrafının sıx sümük divarı ilə təmin olunmasında və kiçik sümük qüsurlarında istifadə olunur.



GEISTLICH COMBI-KIT COLLAGEN

100 mg-liq kollagen tərkibli sümükdən və 16 x 22 ölçülü Bio-Gide membranından ibarətdir.

Kombinasiya şəklində istifadə sistemin xüsusiyyətlərini GBR prinsipinə uyğun olaraq kiçik sümük auqmentasiyası üçün optimallaşdırıb.

Piezo cərrahiyyə səmərəli, səliqəli, təhlükəsiz, asan və sürətli əməliyyat idarəçiliyinə imkan verir. Xüsusilə alətin dəqiqliyi Cərraha ətrafda olan yumuşaq toxumanı zədələmədən dəqiq, səliqəli və hamar kəsiklər aparmağa şərait yaradır.

Diş daşlarından tutmuş kariesə qədər, Endodontikdən paradontal iltihaba qədər, diş çəkilmələrindən restovrasiya işlərinə qədər. Problemin çözülməsində əyilgənlik göstərməklə bu aparat gündəlik praktikada həkimin əvəzsiz assistenti olması üçün hazırlanmışdır.


Yeni Multi Piezo Touch-in paneli ergonomik dizayn üslubundadır və bu istifadəçiyə bütün funksiyaları sürətli və intuitiv idarə etməyə imkan verir. Aktiv(touch) səthin hamar olması təmizləməyi, dezinfeksiya etməyi asanlaşdırır.




Piezosurgery touch basic 2

Piezosurgery touch starter




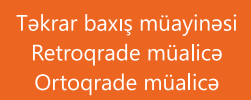


Yüksək performansla malik Fisiodispenser motoru Cənubi Koreyanın yüksək texnologiyalı Saeshin firmasının məhsuludur.

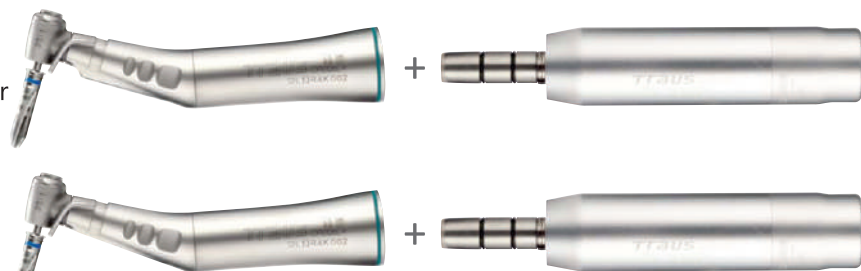

- Həddən artıq yüklənmənin avtomatik qoruma funksiyası
- Fırlanma nisbəti: 1:5, 1:4, 1:1, 16:1, 20:1, 27:1, 32:1, 64:1
- "ISO3964" sertifikatlı TRAUS MBP10SL(SX) Elektron motor.
- Üstün iş üçün RPM və qüvvənin əməliyyat zamanı göstərməsi.
- Motorun avtomatik kalibrasiya funksiyası
- Ergonomik quruluşa malik ayaqla idarə edici.
- Optik və qeyri-optik funksiya.

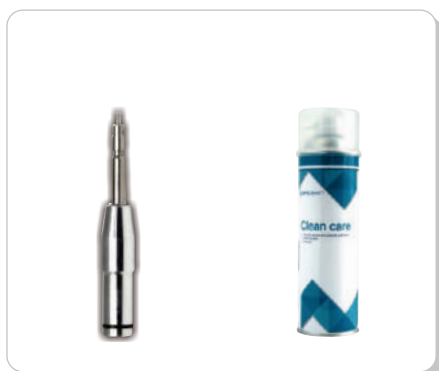

OPTEO

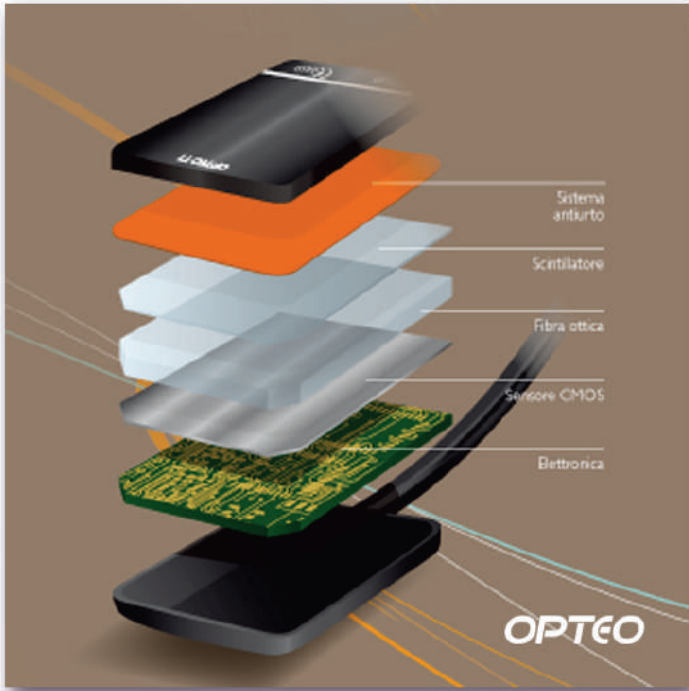

CMOS texnologiyası ilə təchiz olunmuş **OPTEO** vizioqrafı (intra oral sensor) rahatlıqla yüksək keyfiyyətli şəkillər əldə etməyə imkan yaradır. Opteo xüsusilə ergonomikliyi və dizaynı ilə fərqlənir. Hamar kənarlar və ideal qalınlığa malik olması ilə pasienti ən optimal rahatlıq ilə təmin edir. Birbaşa USB bağlantısı və 3 metrlik kabeli ilə Opteo daşınabilir. A²-S (avomatik aktivasiya sistemi) yeniliyi ilə təchiz olunması cihazın xüsusiyyətlərini daha da artırır.



Owandy- RX

Texnologiya bütün sadəliyi ilə daha çox etibarlılıq üçün yeni LCD, yeni dizayn !3.7 "LCD ekranla təchiz olunmuş, **Owandy-RX** sadə və həssas istifadəçi interfeysinə malikdir. Enerjiyə qənaət məqsədilə generatorun uzunmüddətli fasilə zamanı birləşdirilmiş yuxu rejimi funksiyası vardır. Rentgenoqrafiya təhlükəsiz və simsiz tətik vasitəsilə uzaqdan idarə olunur, belə ki heç bir əlavə kabel iş zamanı maneçilik yaratmır.



Owandy Cam



Əməliyyat otağında qoşulma rahatlığına görə **Owandy Cam** Sizin üçün hər zaman əlçatandır. Kameranın birləşmə nöqtəsi və USB2 bağlantısı vasitəsilə Siz onu rahatlıqla öz həmkarlarınızla da paylaşa bilərsiniz. İşlək, didaktik və həssas, Owandinin yeni intra-oral kamerası video və ən yeni digital texnologiyanın üstünlüklərini özündə cəmləyir. Kompakt, rahat və işlək olması ilə bu kamera sizin işinizdə əsaslı irəliləyişə səbəb olacaq.





İMLANTOLOJİ TERMINOLOGİYA

Oxuculara təqdim olunan bu kitabda implantoloji terminlərin Azərbaycan dilində izahı ingilis qarşılığı ilə verilmişdir. Bir çox terminlər Azərbaycan dilində mövcud olmadığı üçün yeni olaraq yaradılmış və ya başqa dillərdəkinə uyğun qarşılığı tərtib olunmuşdur. Çox yaxın gələcəkdə bu kitabın Rus, Türk və Alman versiyaları da elmi tibbi ictimaiyyətə təqdim olunacaq.





Modevaks
modelləşdirmə mumu



Lavaks
modelləşdirmə mumu



Lipkiy mum
yarişqan mum



Vosk
bazis üçün mum



Ftoraks
bazis protezi bişirmək
üçün plastmas



Armavir
bazis üçün mum



Sinma
çıxmayan protezlər üçün plastmas



Model mum



Etakril
bazis protezi bişirmək
üçün plastmas



Buqel mum



Protakril
özübərkiyən plastmas



Giliz

Supra 1000

Xüsusiyyətlər

1. Adaptorun gücü:

Giriş: dəyişən cərəyan 100~240, 47~63Hz

Çıxış: sabit cərəyan 5Vdc±5%, 2A

Çıxış gücü: 10 W

2. Işıq mənbəyi

Model Tipi: Göy LED

Dalğa uzunluğu: 430~490nm

3. Aparat:

Uzunluq: 222mm

Diametr: 28mm

Çəki: 94.5g



TOP Light Turbo

Xüsusiyyətlər

1. Adaptorun gücü:

Giriş: dəyişən cərəyan 100~240, 47~63Hz

Çıxış: sabit cərəyan 9V, 1.2A

Çıxış gücü: MAKS 10.8W-i

2. Işıq mənbəyi

Model Tipi: Göy LED

Dalğa uzunluğu: 430~490nm

3. Aparat:

Uzunluq: 222mm

Diametr: 28mm

Çəki: 94.5g



Zoom aparatı

Daha rahat fəaliyyət üçün 360° fırlanan qövs formalı işıqlandırma zonası ağızın içini tam formada işıqlandırır və lazım olan mövqeləri ağartmağa şərait yaradır. İstilik vermədən və tam sakit işləyir. Aparatın müxtəlif rejimlərlə təchiz olunması əksər növ ağardıcı materiallarla uyğunlaşmağa imkan verir. Arqonomik dizayn, istənilən vəziyyət üçün tənzimləne bilən qollar və hərəkətli olması istifadəni tam rahatlaşdırır.





Apekslokator BINGO PRO

- Ölçüsü – 130x80x60 mm
- Çəkisi – 300q
- Display növü – rəngli qrafik TFT
- Ekran ölçüsü – 3,5"
- Güc – təkrar doldurulan NiMH batareyası 2.4Vt
- Yükləmə qurğusu – 24V 50/60 Hz və ya 120V 50/60 Hz
- DC – 6V



Portativ apekslokator BINGO 1020

- Ölçüsü – 16x95x35 mm
- Çəkisi – 280q
- Display növü – maye kristal ekran STN
- Ekran ölçüsü – 83x51 mm
- Güc – 3.6Vt
- Yükləmə qurğusu – 220V,50HZ və ya 100V,60HZ
- DC – 6V



NovApex

Texniki göstəriciləri

Proqramlar	200
Temperatur	300°C to 1200°C (570°F to 2200°F)
İstilik tərəcəsi	10°C/min to 150°C/min 20°F/min to 270°F/min
Vakuum səviyyəsi	100mm/Hg to 760mm/Hg 4"/Hg to 30"/Hg
Hündürlük	52cm (20")
Çəki	16Kg
Elektrik	220-240V / 50Hz, 2000W 100-120V / 60Hz, 2000W



SPECTRUM HT

Bir qələmli elektroşpatel



İki qələmli elektroşpatel



Mum əridən (voskotopka)
1 gözlü



Mum əridən (voskotopka)
4 gözlü



MINİ BƏZƏMƏ TƏKƏRLƏRİ

Mini abrasive təkərləri
yüksək keyfiyyətli 3M
Scotch Brite
materialından
hazırlanmışdır və
soraqat kağız üçün
ən yaxşı
alternativdir. İkiqat
dizayn üslubu və
balanslaşmanın
olmaması material
itkisini aradan
qaldıraraq şotkanı uzun
ömürlü edir. Müxtəlif
işlərin görülməsində tətbiq
olunur. Kompazit
təbəqələrin, akrillərin və
bahalı zərgərlik materiallarının
okluzyal səthlərini bəzəməkdə, nazik
yumşaq qat akrillərin və termoplastik Nylon
materialların sürətli cilalanmasında çox effektivdir.




CİLALAMA ŞOTKALARI

Stomatoloji cilalama və parlatma
işlərində ideal olan bu şotkalar flanel
dəri və zeta parçasından
hazırlanmışdır.



DIADISC, DIASTONE

Cilalama və yonma işini görən
Diadisc və Diastone almazdan
hazırlanmışdır.

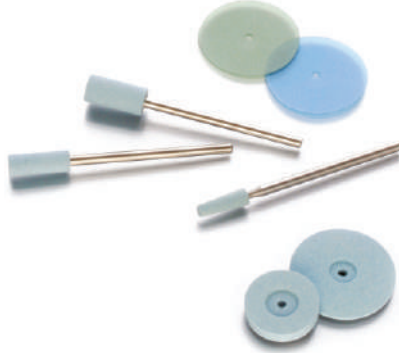

MINİ CİLALAMA BUFLARI

Hatho-nun geniş sıralamaya
malik mini cilalama şotkaları
mümkün olan hər bir tələbi
qarşılayır. Pambıq
saplarından, muslin,
Flannel, keçə, mikro lifli
dəridən və xüsusi ZETA
parçasından hazırlanır.
İstənilən dental
materialın yüksək
səviyyədə parıltısını
təmin edə bilər.



HATHO FEX S PLUS P

Yonma və cilalama da istifadə
olunur. Tərkibində sərt almaz
şpatı var.
Materialın sökülməsi,
cilalanması və səthi son
cilalamaya hazırlamaq
üçündür.



FELT POLİSHER

Hathonun keçə cilalayıcıları müxtəlif cilalama birləşmələrini özündə daşıyır. Preslənmiş təbii qoyun yununa kiçik abraziv almaz hissəcikləri əlavə olunmuşdur. Cilalama pastasından asılı olaraq bu keçə cilalayıcılar kompozitlərin, bahalı və bahalı olmayan metalların hətta titanın cilalanması və mükəmməl parıldadılması üçün istifadə olunur.



KERAMİKA FIRÇALARI

Bu fırçalar keramikadan hazırlanan müxtəlif formalı dişlərin mələşdirilməsində ən önəmli alətlər sayılır.



POLİSTAR CASE



POLİSTAR

Dünyada cilalama işi üzrə ən uğurlu faktor düzgün cilalama pastasının seçilməsidir. Müxtəlif növ dental materialların cilalanması üçün Hatho firması özünün Polistar məhsul sıralamasını təqdim edir. Polistar tərkibindəki keyfiyyətli minerallar və mumun optimal qarışığı ilə fərqlənir.



ACRYPOL SET



SLIMLINE ŞOTKALARI

Bu şotkaların xüsusi dizayn forması var. Kənarların sıx tüklə örtülməsi mərkəzində nazik parça təbəqənin olması və polistar tərkibli olması bu şotkaların istənilən dental cilalama işlərində istifadə edilməsinə imkan verir.



MINİ CİLALAMA ŞOTKALARI

Hathonun mini şotkaları müxtəlif formalı geniş sıralamaya malikdir.






STAR Plus

HERASIT Plus



GOLD PARTNER

Gold Partner - dörd qatlı, ultrabənövşəyi işığa qarşı həssas olan fluoressent akrilindən izosit sistemi ilə hazırlanmış protez dişlərdir. Bu dişlər qaralmaya məruz qalmır və tərkibində nikotin əks etdirmir.

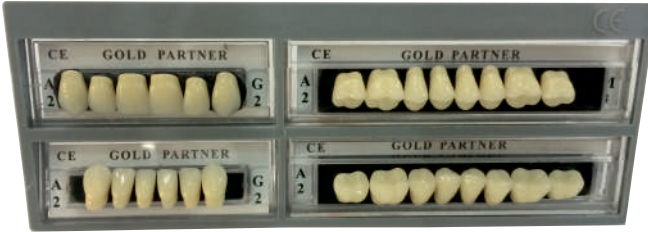

IZO ROCK

Üç rəngli dörd laylı sintetik farfor (KOMPSİTE) sistemlə çıxarılmışdır. UV şüalara həssasdır. Anatomiq quruluşa uyğun forma və gözəlliyə malikdir.

İstilik və polimerizə olan damaq qayda akrili ilə asanlıqla kimyəvi olaraq bir-birinə bağlana bilər. Qaralma etmz, nikotin tutmaz.

Çox yüksək istilikdə (250 dərəcə) polimerizə edildiyindən, mufla əməliyyatından sonra rəng və forma dəyişdirmz.

Aşağı elastiklik və yüksək sərtlik kimi xüsusiyyətlərindən ötürü ona dişlərlə birlikdə aşınma prosesi göstərir.

Rənglər Vita rəng şkalasına görə hazırlanmaqdadır.




Ortolux-Top

Amerikan tip qəliblərdə iki qat qarnitur.iki müxtəlif rəng şkalası mövcuddur; NEUHUE (B59-B81) və A0-A1-D4 (22 ton)-Mükəmməl estetik effekt,təbii diş görünüşü

- yüksek molekulyar ağırlıqda və möhkəm çarpaz bağlanmış polimerlərdən istehsal olunmuşdur
- yükseksərtlilik və yeyilməyə qarşı davamlılıq
- Biouyğunluq
- ISO sertifikasiya 22112:2005

Uyğun qiymətə iki qat, geniş model seçiminə malik akrilik dişlər. Davamlı, uzun ömürlü, mükəmməl keyfiyyətli, məsaməsiz, işığı əks etdirmək qabiliyyəti təbii dişə oxşar qarnitur.

Unidesa-Odi.nin spesifik texnologiyası əsasında hazırlanmışdır.

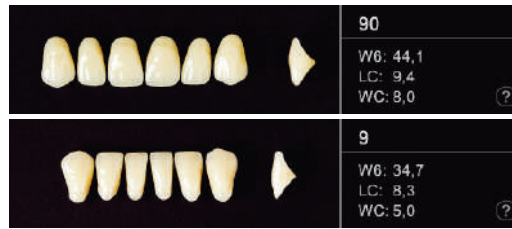

Odipal

Avropa tip qəliblərdə üç qat qarnitur. VİTA şkalası rənglərinə uyğundur (0-A1-D4)(16 ton)

- Mükəmməl estetik effekt,təbii diş görünüşü
- yüksek molekulyar ağırlıqda və möhkəm çarpaz bağlanmış polimerlərdən istehsal olunmuşdur
- yükseksərtlilik və yeyilməyə qarşı davamlılıq
- Biouyğunluq
- ISO sertifikasiya 22112:2005

Odipal üç qatlıdır, keramikada istifadə olunan rənglərə bənzər yüksək keyfiyyətli rəngləndirmə effektindən istifadə olunub. Öz rəng spektrinə görə Odipal ağızda keramika dişlər olan halda istifadəəoluna bilər və ilk baxışda heç bir rəng müxtəlifliyi nəzərə çarpmayacaq. Odipal dişləri asanlıqla ağızda olan körpü vəya implant üstü dişlərlə birgə istifadə edilə bilər. Müxtəlif qəlib və artikulyasiya tipləri mövcuddur. Geniş tətbiq sahəsinə malik olması xüsusilə keyfiyyətin tələb olunduğu yerlərdə bu məhsulu əvəzlənməz edir.




Odident

Avropa tip qəliblərdə dörd qat qarnitur. Daha güclü qəliblərlə kombinasiya edilməsi dişlərə xüsusi estetik görünüş verir bu da implantoloji işlərlə birgə istifadəsinə imkan verir (geniş və uzun vestibulyar səthlərdə).

VİTA rəng şkalası(0-A1-D4) (16 ton)

- Mükəmməl estetik effekt, təbii diş görünüşü
- yüksek molekulyar ağırlıqda və möhkəm çarpaz bağlanmış polimerlərdən istehsal olunmuşdur
- yeyilməyə qarşı davamlılıq
- Biouyğunluq-ISO sertifikasiya 22112:2005

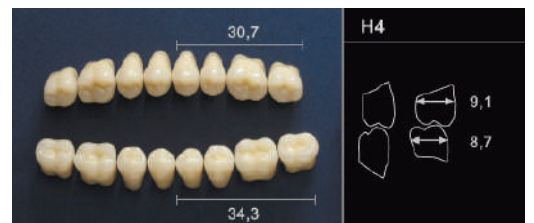

CX207-C-1SP

Lazım olan hava təzyiqi: 0.2-0.24Mpa
Fırlanma sürəti: 300,000rpm
Material: Aluminum ərintisi
Çəkisi: 40g
Tək gözlü su səpmə
Düymə ilə işə düşür.
Kartric: açılıb yığılır.



Cx-235-3

Xarici soyutmalı mikromator. 2 və 4 yuvalı olur.
Fırlanma sürəti: (min/rpm): 22,000-27,000



CX-235

Aşağı sürətli ucluq 1:1 nisbəti ilə işləyir. Lazım olan hava təzyiqi: 0.3Mpa
Fırlanma sürəti 20,000rpm-qədər.
Bor tətbiqi $\varnothing 2.35-0.016\text{mm}$ (ISO1797-1)
Səs: = 70dB



CX-207-S

Əlverişli və ekonomik, Təbii dizayn, rahat idarəetmə.
2 və 4 yuvalı formaları var.



Cx-235-2

Xarici soyutmalı düz başlıq.



NABOR

İstifadəçinin rahatlığı
üçün lazım olan
komponentlərlə
təmin olunan müxtəlif
tərkibli COXO naborları
qiymət baxımından
əlverişlidir.



C-SMART-I

XUSUSIYYƏTLƏRİ:

- Geniş LCD ekranlı asand idarə etmə.
- Dövriyyəsi 1:1 nisbətlə dərəcəli ucluq.
- Fırlanma sürəti və dövriyyəsi 9 ayda proqramlaşdırılıb.
- Müəyyən olunmuş dövriyyə limitindən sonra faylın fırlanması avtomatik dayanır.
- Fayl apektə çatdıqda hərəkəti dayanır və avtomatik geriye fırlanır.
- Daha təhlükəsiz tətbiq etmək üçün fayl apektə yaxınlaşdıqda sürət azalır.
- Fayl kanala daxil olan zaman avtomatik olaraq işə düşür və əksinə kanaldan çıxarıldıqda dayanır.
- Yüksək tutumlu yüklənə bilən Li-ion batareyası və adaptorda işləmə.



DB-686 LATTE

- Zərərsiz və göy rəngli işığa malik yüksək qüvvəli lazer lampası.
- Rəqəmsal ekran və tənzimləyə bilən işləmə vaxtı.
- Yüksək tutumlu, yüklənə bilən Li-ion batareyası və batareyanın boşalması barədə xəbərdarlıq detektoru.
- Artıq temperaturun əmələ gəlməsindən qoruyan xüsusi detektor.
- İşığın gücü: 1200mw/sm²-dən çox.



DB-686-1B

XUSUSIYYƏTLƏRİ:

- Yüksək bitişdirmə qabiliyyətli optik filament.
- Üç rejimli işləmə: Güclü, Tədricən güclü, Yanıb-sönən.
- Avtomatik Fəaliyyətini dayandırma, Avtomatik enerji yüklənməsini dayandırma.
- Enerjinin azalması barədə xəbərdarlıq signalı.
- Mükəmməl enerji saxlama qabiliyyəti.
- Məsafədən naqilsiz və Naqilli işlətmə üsulu.
- İşığın gücü: 1200mw/sm²-dən çox.



DB-685 PENGUIN

- Bionik dizayn, LCD ekran.
- Üç rejimli işləmə: Güclü, Zəif, Tədricən güclü, Yanıb-sönən.
- Temperatur nəzarət funksiyası aparatı əlavə istiliyin yaranmasından qoruyur.
- Yüksək tutumlu Li-ion batareyası adaptor və enerji yükləmə oturmağı ilə yüklənir.
- Naqilsiz və Naqilli işləmə imkanı.
- Daxilində xüsusi həssaslığa malik lazer lampasının işıq ölçü sistemi quraşdırılıb.
- İşığın gücü: 1200mw/sm²-dən çox.



C-SMART-V

- Hərəkətli geniş LCD ekran.
- Dövriyyəsi 1:1 nisbətlə dərəcəli ucluq.
- Fırlanma sürəti və dövriyyəsi 9 ayda proqramlaşdırılıb.
- Müəyyən olunmuş dövriyyə limitindən sonra faylın fırlanması avtomatik dayanır.
- Fayl apektə çatdıqda hərəkəti dayanır və avtomatik geriye fırlanır.
- Daha təhlükəsiz tətbiq etmək üçün fayl apektə yaxınlaşdıqda sürət azalır.
- Fayl kanala daxil olan zaman avtomatik olaraq işə düşür və əksinə kanaldan çıxarıldıqda dayanır.
- Yüksək tutumlu yüklənə bilən Li-ion batareyası və adaptorda işləmə xüsusiyyəti.



NX-100PH

- Fırılanması - 0~50,000
- Elektrik gücü - 120 (W)
- Ölçüler (mm) - L-150 L1-76.5 L2-73.5 D1-29.5 D2-14.5
- Çəki - 200 g



NX-100SAH

- Fırılanması - 0~50,000
- Elektrik gücü - 120 (W)
- Ölçüler (mm) - L-156 L1-82 L2-74 D1-29.5 D2-19.8
- Çəki - 200 g



Ball bearing (podşipnik)

Texnik və həkimlər üçün nəzərdə tutulan mikromotorlarının hər bir hissəsinə müvafiq olan beş cür podşipnik mövcuddur. İstifadəsi çox asan olan bu mikromotorların hissələrini də dəyişmək olduqca asandır.



Micro NX ANYXING 300S

Texniki göstəricilər:

- Ekranın elektron görüntüsü
- Əl / ayaq idarəsi
- Fırılanma sürəti - 0-50 000 rpm
- Revers
- Yüklənmədən müdafiə



Micro NX-201N

Texniki göstəricilər:

- Fırılanma sürəti - 0-35 000 rpm
- Ayaqla idarə olunma

NX-100E

- Fırılanması - 0~50,000
- Elektrik gücü - 120 (W)
- Ölçüler (mm) - L-150 L1-76.5 L2-73.5 D1-29.5 D2-14.5
- Çəki - 200 g



Pin Din Cord

Texnik və həkimlər üçün nəzərdə tutulan mikromotorlarının bağının zədələnməsi hallarını aradan qaldırmaq üçün əlavə hissə.

WHITNESS PERFECT

Karbamid peroksit daxildir. 10%, 16% və 22%-lik olur. 20% su, 3% kalium nitrat, 0,2 Natrium florid və Qlikol. Tərkibindəki su, qlitol, 3% kalsium nitrat və 0.2% natrium florid həssaslığı minimuma endirir. Həkim nəzarəti altında, xəstə tərəfindən evdə tətbiq edilir. Hər bir şpris ilə 8, 9 dəfə tətbiq etmək olar. Plakin köməyi ilə gündə 2-4 saat dişdə saxlanılmalıdır. Lazım olan effekti alana qədər prosedur davam etdirilməlidir.



5 ədəd 3 qr-liq gel şpris, 5 ədəd tətbiq etmə ucluğu, 2 ədəd 1 mm-lik vinil val, 1 ədəd val saxlama qabı.

WHITE CLASS

White Class kalsium əsaslı Hidrogen Peroksid tərkibli diş ağartma sistemidir. Gündəlik 1 saatlıq tətbiq etmə periodu, təhlükəsiz, üstün texologiya ilə hazırlanmaya görə həssaslığın azaldılması.



WHITNESS HP BLUE



FGM WHITNESS HP RED

- 35%-lik Hidrogen Peroksid qarışığı
- Tərkibində 30% su olması ağartmadan sonra həssaslığı aradan qaldırır.
- İşıq cihazları, laser, LED və plasma ark sistemləri ilə tətbiq oluna bilər.
- Tərkibində olan 30% su, xüsusi pigment qrupları və qeyri-üzvi doldurucular ilə istiliyi lazımı qədər hopduraraq qısa zamanda təsirli ağartmanı təmin edir.

- 1 ədəd 10 qr-liq Hidrogen Peroksid qarışığı
- 1 ədəd 5 qr-liq sıxlaşdırıcı
- 1 ədəd 2 qr-liq natrium bikarbonat
- 1 ədəd 2 qr Top Dam - diş əti qoruyucu gel
- 1 ədəd qarışdırma qabı
- 1 ədəd şpatel



TOP DAM

Dişlərin ağardılması zamanı diş ətinə qorumaq üçün vasitə.



TOPICAL A.P.F GEL

Demineralizasiya prosesi nəticəsində dişlərin mineral hissəciklərini itirməsi sonradan bir çox problemlərin ortaya çıxmasına səbəb olur. Dişlərin mineral hissəciklərinin bərpa olunmasında Sultan firmasının təqdim etdiyi Topical APF geli effektiv təsir göstərir və kariesin qarşısını almağa kömək edir. Tərkibində 1.23% florid ion var. 100 dəfə istifadə etmə imkanı var. Müxtəlif dadlı formaları mövcuddur. Köpük forması da var. Köpük forması ilə təxmini 110 dəfə istifadə etmək olar.

İstifadə qaydası:

Qaşığı 1/3 hissədən artıq olmayaraq gel ilə doldurun. Dişləri tam quruladıqdan sonra qaşığı xəstənin ağzına yerləşdirin. Minimum 60 saniyədən 4 dəqiqəyə qədər saxlaya bilərsiniz. Daha sonra qaşıq çıxarılmalı və gəlin artıq qalan hissəsi xaric olunmalıdır. Udmaq olmaz. 30 dəqiqə ərzində yemək, içmək olmaz.



TOPEX NEUTRAL pH

Sultan firmasının təqdim etdiyi florlaşma məhsullarından biri olan Topex Neutral, tərkibində turşunun neytrallaşdırılması ilə digərlərindən fərqlənir. Tərkibində 2% sodium florid var. Dişlərində keramik və kompozit restovrasiyası olan xəstərlər üçün nəzərdə tutulmuşdur. Ağzda saxlama müddəti 4 dəqiqədir. Köpük forması da var. Müxtəlif dadlı formaları mövcuddur.



TOPEX® TOPICAL ANESTHETICS

Tərkibində 20% benzokain olması müvəqqəti və iti ağrını hiss elətdirməmək üçün çox güclüdür. Ağzda sonradan heç bir aci dad əmələ gətirmir.



FLOURID TRAY

Bir dəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan qaşıqlar yuxarı və aşağı diş sırasına florid vasitələri tətbiq etmək üçün nəzərdə tutulmuşdur. Qaşığın hər iki tərəfi bağlandıqından ağza yerləşdirilməsi çox asandır.



Amerikanın **ORANGE** firmasının təqdim etdiyi, yüksək keyfiyyətli elevatörlər və müxtəlif formalı kəlbətinlər qiymət və keyfiyyət baxımından olduqca münasibdir.



Compo Set - 1004



SMART Polisher Set - 3027




SMART Mini Prophy Set - 3029



Amalgam-Metal Set - 1003



SMART Brush Set - 3026

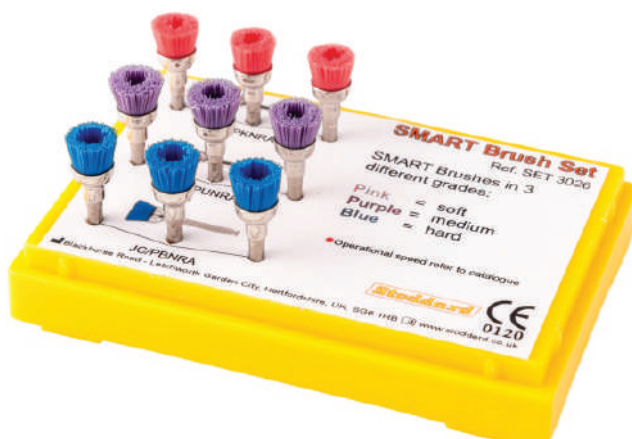

Dia-Comp Set - 1001

